


# VelaShape II™

Tratamiento  
de la celulitis  
y remodelación  
corporal



Science. Results. Trust.

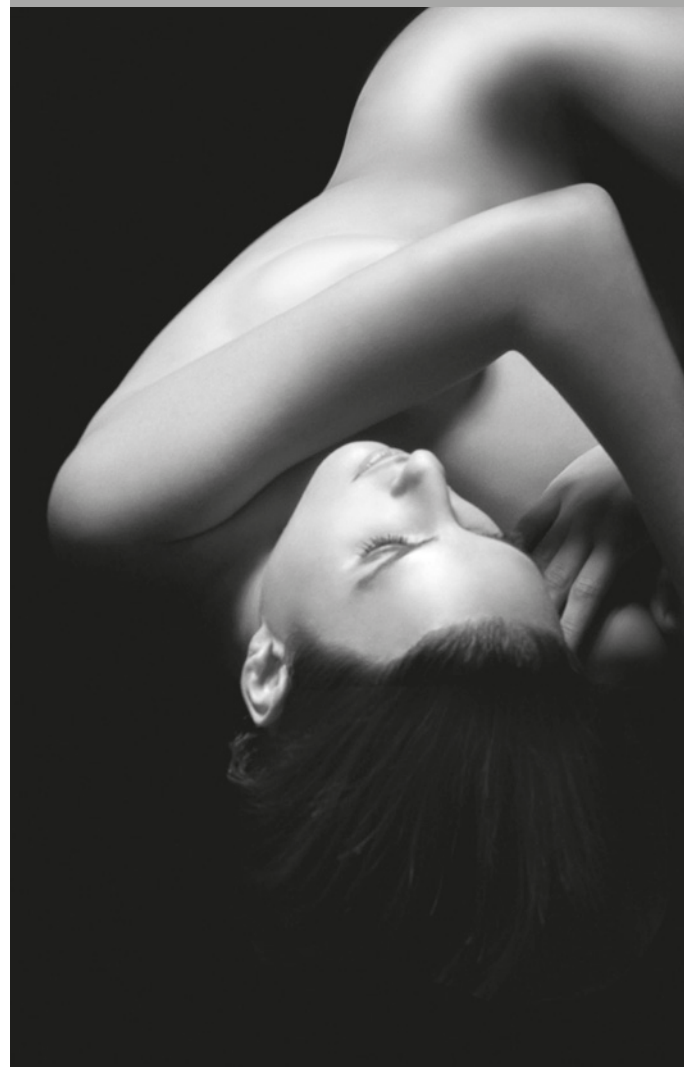

"En mi consulta, el boca a boca se ha extendido rápidamente y muchos de mis pacientes solicitan el tratamiento con VelaShape II. Los pacientes que acuden por cuestiones médicas ahora preguntan sobre este tratamiento de remodelación corporal."

Vince Afsahi, M.D.  
Dermatólogo certificado, Newport Beach, CA

# VelaShape II

Un equipo óptimo para la reducción de la celulitis y la remodelación corporal

VelaShape II responde a la creciente demanda de los pacientes por tratamientos corporales integrales, que abarquen la remodelación corporal y la reducción de la celulitis.

A través de la revolucionaria tecnología eLōs™, VelaShape II trata los tejidos más profundos, ofreciendo una reducción

cuantificable de las capas de grasa, obteniendo así el moldeado corporal. A su vez, VelaShape II trata también el tejido conectivo circundante, por lo que se produce una reducción de la celulitis.

Es un tratamiento terapéutico sencillo, cómodo, no invasivo y sin periodo de recuperación.

**Covers desechables para el aplicador**

- Optimiza los resultados del tratamiento
- Elimina la contaminación
- Ahorra tiempo

**Vcontour™**

Utilizado en pequeñas superficies, como los brazos, las pantorrillas, y para reforzar los resultados del aplicador Vsmooth.

**Terminal Inteligente**

La interfaz de usuario del sistema ayuda a optimizar los tratamientos indicando cuándo cambiar los accesorios. También permite realizar diagnósticos de servicio al sistema.

**Vsmooth™**

Utilizado en zonas amplias como los muslos, los glúteos o el abdomen.




VelaShape II

## La ciencia tras la tecnología de VelaShape

### La ciencia tras la tecnología de VelaShape

Empleo sinérgico de las energías – El sistema VelaShape II utiliza cuatro modalidades de tratamiento:

- Luz infrarroja (IR) que calienta el tejido a una profundidad de hasta 5 mm.
- Radiofrecuencia bipolar (RF) que calienta el tejido a una profundidad de entre 2 y 20 mm.
- Mecanismos de vacío +/- masaje que permiten dirigir precisamente la energía al tejido.

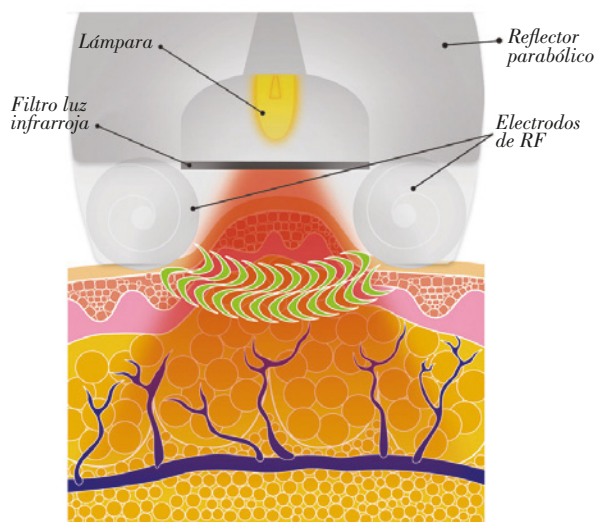

Impacto biológico del tratamiento – Aumento del metabolismo que lleva a alteraciones anabólicas y catabólicas demarcadas y deseadas con profundidades y componentes cutáneos predeterminados.

### Manipulación mecánica

(Vacío + Masaje)

- Estimula la perfusión sanguínea y linfática.
- Facilita la actividad de los fibroblastos.
- Reduce la viscosidad de los cúmulos de células grasas.
- Fomenta la vasodilatación y la extravasación de oxígeno y nutrientes.
- Permite calentar a distintas profundidades.
- VelaShape – Primer equipo médico que cuenta con la autorización para la reducción de la circunferencia.
- Primer equipo médico disponible para el tratamiento de la celulitis.
- Resultados visibles en tan solo 2 sesiones de tratamiento.
- Tratamiento de un abdomen, glúteos o muslos en 20 minutos.


### Calentamiento

(Energías de IR + RF)

- Potencia la perfusión sanguínea y aumenta la disociación del oxígeno de la oxihemoglobina.
- Facilita la actividad de los fibroblastos.
- Aumenta el metabolismo de las células adiposas.
- Mejora la textura de la piel (septos y colágeno en general).

### Cómodo protocolo de cuatro a seis tratamientos

- Tecnología patentada elōs™ que ofrece resultados óptimos en el tratamiento tanto de tejidos profundos como de la superficie cutánea.
- Estimula rápidamente la respuesta lipolítica de los adipocitos.

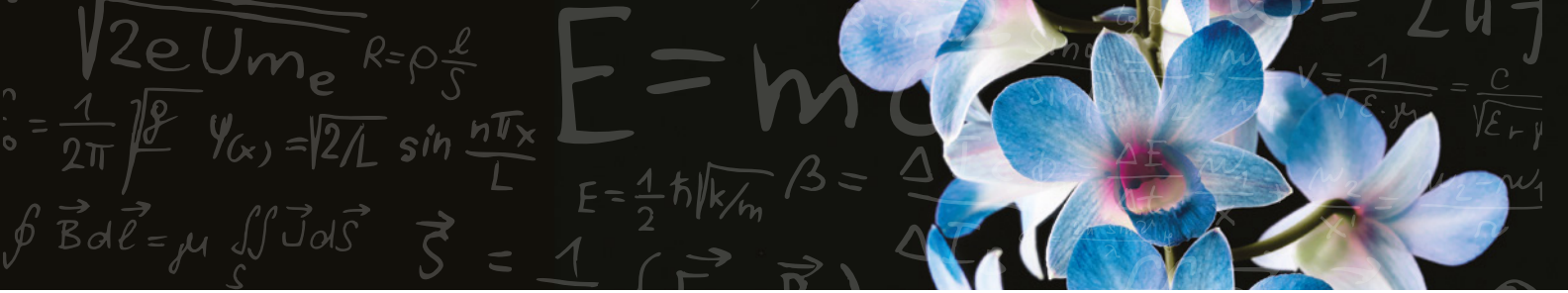

"La aplicación VelaShape ha sido un excelente complemento para mis procedimientos de liposucción. He observado que los tratamientos de VelaShape han ayudado a mejorar los resultados de mis pacientes tras la liposucción, mejorando la **contracción cutánea** y **alisando los tejidos.**"

Sanjay Grover, M.D., F.A.C.S.  
Cirujano Plástico certificado, Newport Beach, CA

### La celulitis y el mercado de la remodelación corporal

Se estima que el 80% de las mujeres mayores de 20 años de edad, padecen celulitis. Unas estadísticas como estas han llevado a un aumento en la demanda de los tratamientos de moldeado corporal.


Como líder en el mercado de la remodelación corporal, Syneron entiende que la experiencia cuenta. Los casi cinco años de experiencia clínica tras VelaShape™ ofrecen a nuestros clientes la mejor solución no quirúrgica para satisfacer la demanda de tratamientos corporales seguros y efectivos.

## Resultados clínicos demostrados

La seguridad y efectividad del tratamiento con VelaShape™ ha sido demostrada tanto en ensayos clínicos multicéntricos como en los más de 3,5 millones de tratamientos que se han realizado en todo el mundo. Los resultados de un estudio reciente indican:

- Una reducción media de 5,92 cm en los glúteos, 2,54 centímetros en los muslos y 7,37 centímetros en la zona del abdomen.
- La mayoría de los pacientes manifestaron no sentir molestias durante ni después del tratamiento.
- Se observa una mejoría de hasta el 60% en la textura cutánea (incluyendo laxitud y tono debido a la reducción de la celulitis) tras 5 sesiones de tratamiento.


Fotos por cortesía de Lori Brightman, M.D.

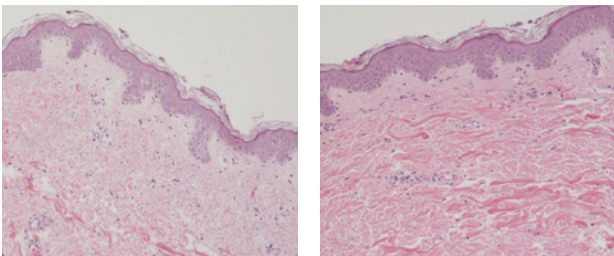

Antes

Resultados histológicos un mes después de cinco tratamientos

Fotos por cortesía de Ruthie Amir, M.D.

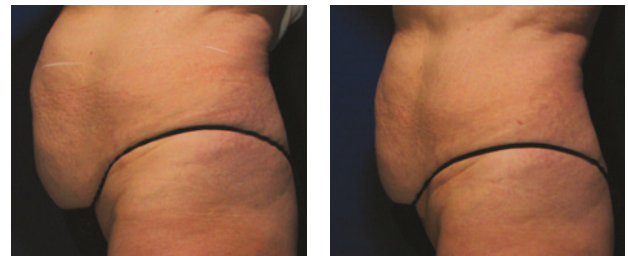

Antes

Tras cinco tratamientos


Photo courtesy of Maurice Adatto, M.D.



Antes

Tras seis tratamientos

Photo courtesy of Mark Winter, M.D.

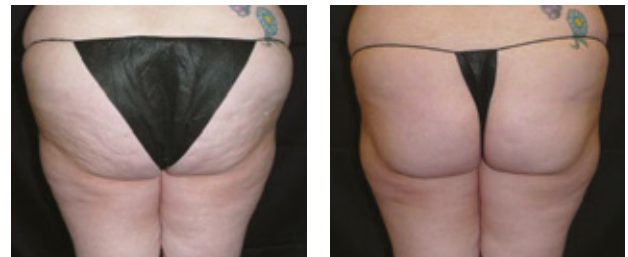

Antes

Tras 5 tratamientos





Science. Results. Trust.

## VelaShape II

### Especificaciones del sistema

Potencia de radiofrecuencia	Hasta 60 W
Lámpara infrarroja	Hasta 35 W
Espectro de luz	700 - 2000 nm
Vacío	Pulsado
Área de tratamiento	Vsmooth – 40 mm x 40 mm Vcontour – 30 mm x 30 mm
Peso	27 kg. / 60 lbs.
Dimensiones [An x F x Al]	36 x 55 x 80 cm. / 14,2 x 21,6 x 31,5"
Requisitos eléctricos	100-230 VAC; 50/60 Hz; monofásico