

VelaShape III

Tratamientos corporales
especializados



"Hemos observado importantes resultados obtenidos sistemáticamente con el uso de VelaShape. Muchos de nuestros pacientes han perdido hasta 5 centímetros de cintura y abdomen."

Lori Brightman, Médico
Dermatóloga titulada, Nueva York, NY



El mercado de la remodelación corporal

En general, cuando se trata del cuerpo la mujer es su crítica más dura. El 91% de las mujeres manifiesta que le gustaría cambiar o reducir ciertas partes de su cuerpo. La mayoría lo han intentado con dietas y ejercicio pero sienten que no es suficiente. Una de cada tres mujeres dice haber considerado otras soluciones para eliminar la grasa¹ que van más allá de las dietas y el ejercicio.

VelaShape III – El equipo óptimo para la remodelación de la figura

VelaShape III es la solución perfecta sin tener que pasar por el quirófano para tratar las 'áreas problemáticas' que hacen a las mujeres sentirse a disgusto con su propio cuerpo. VelaShape III es un tratamiento único, fácil de usar, de acción inmediata, cómodo, terapéutico y eficaz para la remodelación de la figura y ofrece protocolos clínicos mejorados para obtener resultados consistentes y reproducibles.

La amplia experiencia de Syneron, así como las investigaciones en la producción de equipos eficaces de remodelación de la figura, han contribuido al creciente éxito de la marca VelaShape. Con más de 10 años de experiencia clínica, más de una docena de estudios, más de 5 millones de tratamientos independientes realizados a nivel mundial y más estudios publicados que cualquier otro equipo médico de remodelación de la figura, VelaShape es el tratamiento de carácter no invasivo más reconocido hoy en día en el mercado.

VelaShape III cuenta con el distintivo de la UE para la remodelación de la figura y es un producto aprobado por la FDA² para la reducción del contorno de abdomen y muslos.

(1) Base: Total (n = 1000). Edades comprendidas entre 25-60. Leger Marketing, empresa que financia e inspecciona los estudios de mercado.

(2) Administración estadounidense de alimentación y medicamentos.

Potencia y y efectividad

- Mayor potencia por radiofrecuencia - Hasta 150W
 - Alcanza la temperatura máxima con mayor rapidez
 - El tiempo de tratamiento disminuye
 - Mayor densidad energética para un calentamiento de los tejidos de mayor calidad
 - Se necesitan menos sesiones para obtener un resultado óptimo


Nuevo aspecto

- Elegante, sofisticado y con un diseño de última generación
- Ligero, manejable y un 60% más compacto, calidad que le permite ajustarse fácilmente a clínicas de cualquier dimensión
- Se puede accionar con un pedal, reduciendo así la presión necesaria para su funcionamiento
- Diseño ergonómico que permite al operador realizar el tratamiento sentado o de pie

Mecanismo sofisticado

- Nuevo mecanismo de circuito cerrado por radiofrecuencia e incorporación de un sensor de temperatura
 - Suministro eléctrico constante por radiofrecuencia
 - Sistema mejorado de monitorización de las altas temperaturas en los tejidos
 - Permite realizar tratamientos más precisos
 - Aumenta la seguridad y comodidad del paciente
 - Resultados reproducibles y constantes



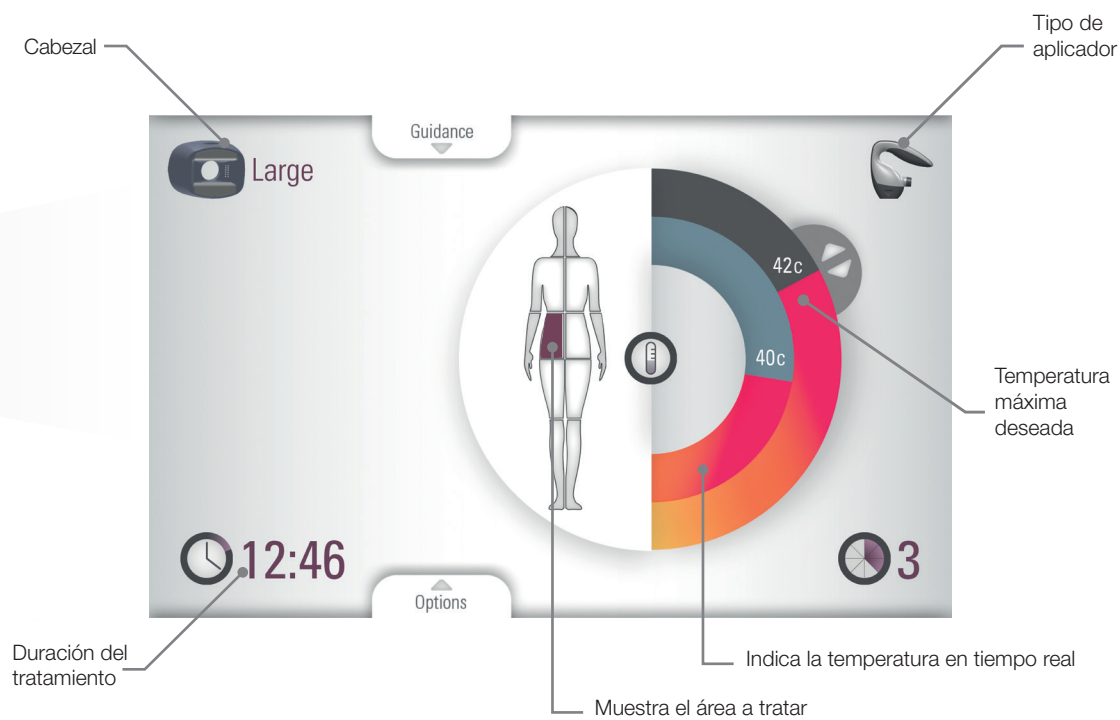

NUEVA interfaz de usuario de última generación

- Nueva interfaz gráfica de usuario, fácil de usar e intuitiva, que permite configurar los parámetros del tratamiento de forma rápida y sencilla antes y durante el mismo
- Basada en la interfaz multitáctil de Android con pantalla full HD de 10 pulgadas



Nuevo aplicador VContour con cabezales de diferentes tamaños

- Nuevo diseño de electrodos por radiofrecuencia que mejoran el contacto con la piel y proporciona un suministro eléctrico de calidad aplicado al tejido graso
- 3 tamaños de accesorios: grande, mediano y pequeño, para un tratamiento óptimo de todas las partes del cuerpo
- Accesorios desechables para mayor higiene



La ciencia que sustenta la tecnología VelaShape

Uso sinérgico de energía – El equipo VelaShape III utiliza las siguientes modalidades combinadas:

- Luz infrarroja (IR) que calienta los tejidos hasta 3 mm. de profundidad
- Radiofrecuencia bipolar (RF) que calienta los tejidos hasta 15 mm. de profundidad
- La absorción asegura un suministro eléctrico preciso

Mecanismo de actuación de VelaShape III


Con la tecnología elōs technology, VelaShape III combina los infrarrojos, la radiofrecuencia bipolar y el masaje de absorción para calentar los tejidos de forma precisa hasta 3 mm. y 15 mm. respectivamente.

La combinación de la tecnología de absorción e infrarrojos junto con la de radiofrecuencia produce el calentamiento intensivo de las células de grasa (adipocitos), los tabiques fibrosos circundantes y las fibras dérmicas subyacentes de colágeno. El calentamiento eficaz de los adipocitos se obtiene mediante un mayor nivel de radiofrecuencia. El diseño óptimo de los electrodos, así como la absorción simultánea, permite que el calor penetre de forma más rápida y profunda en la piel. Este proceso favorece la circulación, el drenaje linfático, el metabolismo celular y la acumulación de colágeno, además de estimular la actividad fibroblástica y remodelar la matriz extracelular.

RESULTADO: La reducción localizada en la piel flácida, disminución del volumen, así como una mejora global de la estructura y la textura de la piel.

Nuevo protocolo clínico con modo de focalización

El protocolo clínico con modo de focalización ha sido desarrollado para tratar de forma optimizada la grasa localizada y reduce 2 mm. como mínimo en tan solo 3 sesiones. Además mantiene el calor de los tejidos, lo que supone unos resultados óptimos y reproducibles.

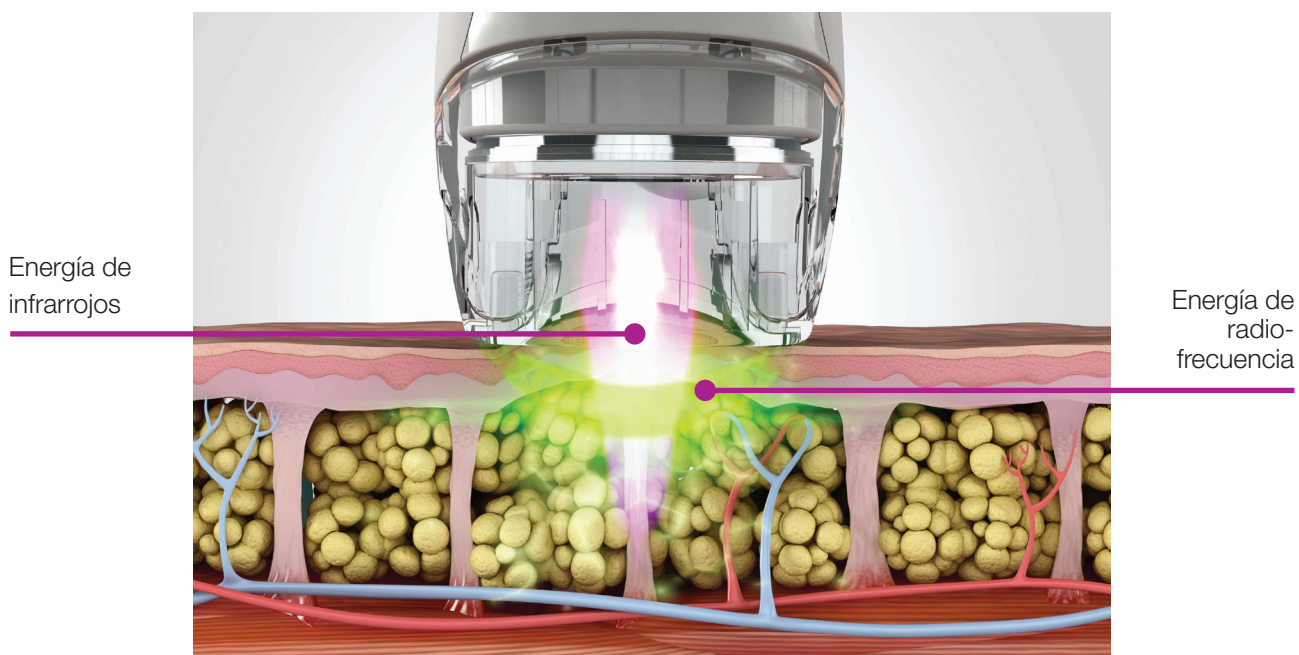


Resultados clínicos probados


La seguridad y eficacia del tratamiento VelaShape han quedado demostradas en pruebas clínicas realizadas en diversos centros y en los más de 5 millones de tratamientos independientes realizados en todo el mundo.

- VelaShape III ha probado la reducción de más de 2 cm. de abdomen y más de 1,5 cm. en los muslos
- Las pacientes que durante el posparto se han sometido al tratamiento con VelaShape muestran una reducción media del 10%* en el área tratada y un nivel de satisfacción del 97%.
- La mayoría de los pacientes no han sufrido molestias durante o después del tratamiento

*Geronemus y otros.

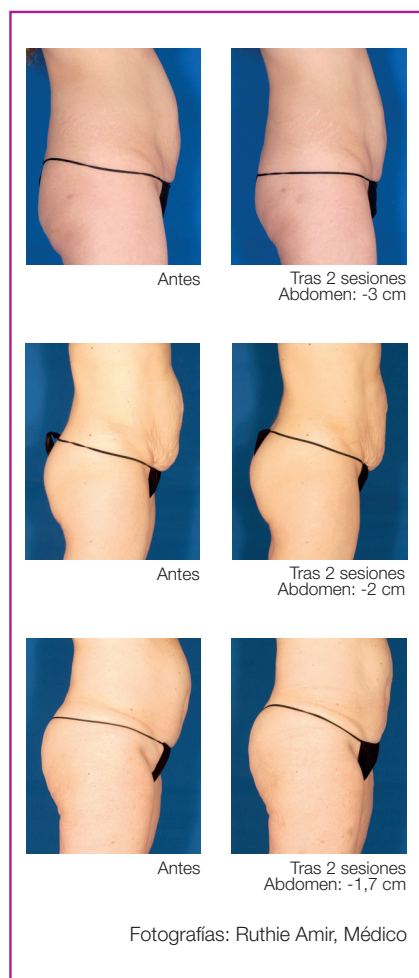

Reducción media del contorno abdominal

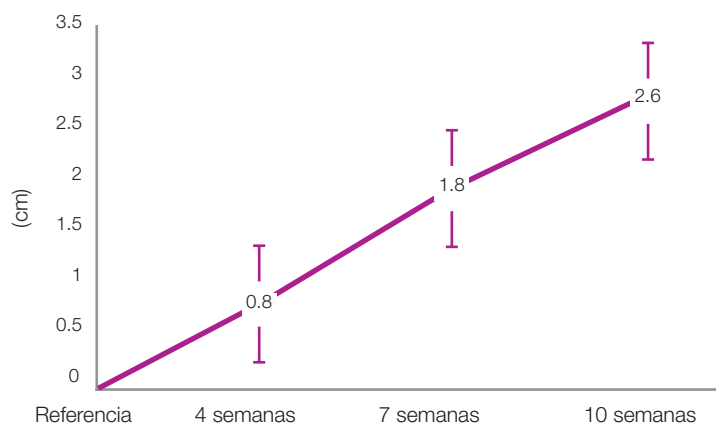

Este gráfico muestra que, tras poner en práctica el nuevo protocolo de tratamiento, se produjo una reducción media de 2,6 cm. en el área abdominal que aumenta con el tiempo.

(Esta información consta en los archivos de Syneron.)

VelaShape III

Especificaciones técnicas

Energía de radiofrecuencia	Hasta 150 W
LEDs infrarrojos	Hasta 3,3 W
Espectro de luz	850 nm
Absorción	Pulsed
Aplicador VContour: Cabezal pequeño Cabezal mediano Cabezal grande	10 x 13 mm 25 x 30 mm 25 x 50 mm
Peso	20kg / 44lbs
Dimensiones [L x An x Al]	38 x 49 x 132cm / 15 x 19 x 52in
Requisitos eléctricos	110VAC ¹ ; 5A; 50Hz; monofásico 230VAC; 2.5A; 50Hz; monofásico

(1) Voltios de corriente alterna

Syneron y Candela son líderes mundiales en el mercado de dispositivos médico-estéticos.

Somos una sola empresa con dos marcas propias, por lo que combinamos el nivel de innovación, experiencia y comprensión del cliente de forma superior a cualquier empresa dedicada al mismo sector.

La estabilidad económica con la que contamos, gracias a nuestra gama de recursos compartidos, permite a esta nueva empresa ofrecer a nuestros clientes la gama más amplia de productos disponible en el mercado, la mejor organización de servicios a nivel mundial y una red de distribución en expansión internacional.

Juntos podemos responder de forma más efectiva que nunca a las necesidades del mercado. Sabemos cómo innovar rápidamente con productos seguros y efectivos para satisfacer todo tipo de necesidades y precios de venta al público. Somos incluso más firmes a la hora de anticipar las tendencias futuras del mercado con el objeto de respaldar a nuestros clientes y sus pacientes. Con los nuevos avances tecnológicos que tenemos en proyecto actualmente, estamos perfectamente posicionados para mantenernos a la cabeza a nivel mundial y continuar ayudando al desarrollo de la práctica empresarial.

Syneron y Candela cuentan con oficinas y distribuidores en todo el mundo.