

CONGELA EL TIEMPO

**REVIERTE EL
ENVEJECIMIENTO**




VENUS FREEZE *Plus*



VENUS FREEZE *Plus*

El sistema más fácil de usar con características avanzadas de seguridad para la reducción no invasiva de arrugas, logrando un efectivo tensado de la piel. Los tratamientos son indoloros y sin tiempo de incapacidad para todo tipo de piel. Además, presenta dos funciones novedosas que mejoran la seguridad del paciente, la facilidad de uso para el operador y obtiene resultados más consistentes y predecibles.

TRATAMIENTOS ANTI-ENVEJECIMIENTO NO INVASIVOS

Tensa la piel flácida y reduce arrugas profundas por medio de neocolagénesis y estimulación de fibroblastos.

CARACTERÍSTICAS AVANZADAS DE SEGURIDAD

Integra un Control Automático de Temperatura (ATC), que brinda una seguridad y comodidad óptima para el paciente durante todo el tratamiento

FÁCIL DE USAR

Con parámetros de tratamiento preestablecidos, aplicadores ergonómicos, y Retroalimentación Térmica en Tiempo Real para una facilidad de uso sin precedentes para el operador.

INDOLORO, SIN TIEMPO DE INCAPACIDAD Y SEGURO PARA TODO TIPO DE PIEL

La RF ha demostrado ser segura para todo tipo de piel. Al ser un tratamiento indoloro y que no requiere tiempo de incapacidad, usted verá una mayor satisfacción de sus pacientes con los tratamientos Venus Freeze Plus™.

MAYOR RETORNO DE SU INVERSIÓN

El modelo de negocio único de Venus Concept asegura un bajo riesgo con un mayor retorno de inversión.



APLICADORES & TECNOLOGÍA (MP)²

DIAMONDPOLAR™ Y OCTIPOLAR™

Venus Freeze Plus™ cuenta con dos aplicadores: DiamondPolar™ para áreas de tratamiento más pequeñas y OctiPolar™ para áreas más grandes. Ambos son ergonómicamente diseñados y funcionan con nuestra tecnología patentada (MP)², que combina RF Multipolar y Campos Electromagnéticos Pulsados (PEMF).



RADIOFRECUENCIA MULTI-POLAR

La RF Multipolar utiliza un complejo algoritmo para proporcionar un calentamiento más homogéneo a diferentes profundidades del tejido, permitiendo una acumulación rápida de calor y facilitando el mantenimiento de una temperatura terapéutica ideal. Esto se traduce en una mayor eficacia y seguridad para el paciente. Sin picos de calor, no hay necesidad de agentes tópicos de enfriamiento lo que hace que los pacientes reciban una experiencia de tratamiento agradable e indolora.

CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS PULSADOS (PEMF)

El efecto de RF Multipolar es mejorado por los Campos Electromagnéticos Pulsados (PEMF), una tecnología no térmica emitida a través de los electrodos del aplicador. Los PEMF han demostrado ser eficaces en la activación de los procesos regenerativos en la piel y han sido usados en la medicina convencional durante décadas.

EL EFECTO SINÉRGICO DE LA RF MULTIPOLAR Y LOS PEMF

(MP)² aumenta sinérgicamente la producción de colágeno a través de dos mecanismos independientes, RF Multipolar (térmica) y los PEMF (no térmica). La radiofrecuencia estimula directamente los fibroblastos, mientras que los PEMF inducen la proliferación de fibroblastos mediante la liberación del factor de crecimiento FGF-2. Juntos, trabajan para aumentar la síntesis de colágeno. (MP)² está comprobado y es efectivo para aumentar el colágeno, mientras tensa la piel, y para la creación de nuevos capilares, lo que renueva el suministro de sangre.





¿POR QUÉ VENUS FREEZE *Plus* ES LA

MEJOR OPCIÓN PARA USTED?

Venus Freeze Plus™ es fácil de usar, lo que lo hace altamente delegable. Integra dos características de seguridad que mejoran la comodidad del paciente y la facilidad de uso para el operador, logrando resultados más consistentes y predecibles.



RETROALIMENTACIÓN TÉRMICA EN TIEMPO REAL

Los aplicadores de Venus Freeze Plus™ están equipados con sensores integrados que proporcionan una retroalimentación térmica en tiempo real, permitiendo un fácil y rápido monitoreo de la temperatura de la piel. La pantalla del dispositivo muestra el perfil de temperatura durante el tratamiento, para que el operador garantice la seguridad del paciente y la efectividad de resultados óptimos.


CONTROL AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA (ATC)

Venus Freeze Plus™ cuenta con Control Automático de Temperatura, el cual permite al operador seleccionar fácilmente la temperatura adecuada para el paciente y el área de tratamiento. Esta característica única hace que sea más fácil mantener una temperatura terapéutica constante durante el tratamiento, mejorando la previsibilidad y consistencia de los resultados. Además, el ATC contribuye a la seguridad del tratamiento.



EXPERIMENTE

LOS RESULTADOS

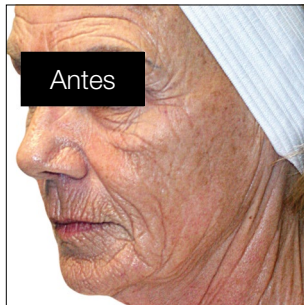


Cortesía de Dima Ali, MD

Resultados después de 7 tratamientos




Cortesía de Eric Adler, MD

Resultados después de 10 tratamientos

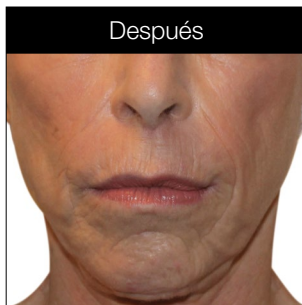


Cortesía de Scott Callahan, MD

Resultados después de 6 tratamientos

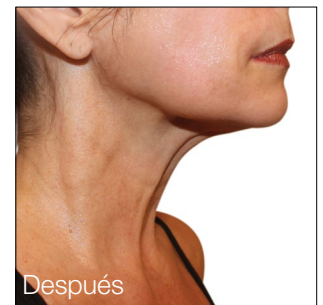


Cortesía de Scott Callahan, MD

Resultados después de 6 tratamientos

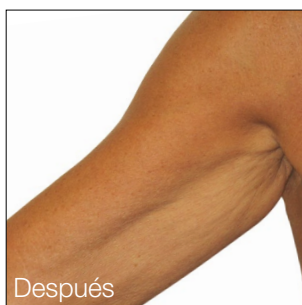

Cortesía de Anti-Aging Ltd.

Resultados después de 6 tratamientos

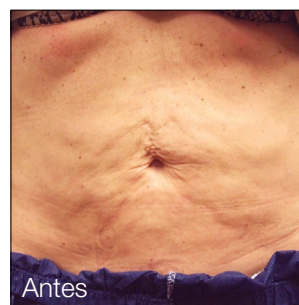

Cortesía de Lowcountry Plastic Surgery

Resultados después de 3 tratamientos

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje de entrada	100-240 V, 50-60 Hz, Max. 5A
Frecuencia de salida RF	1 MHz
Max. Potencia de salida RF	Hasta 150 vatios
Aplicadores (MP)	Aplicador DiamondPolär Aplicador OctiPolär
Cantidad de sintetizadores (MP)	Hasta 8
Frecuencia del pulso magnético	15 Hz
Campo magnético	15 Gauss
Dimensiones	65 cm x 55 cm x 110 cm / 25.6 in x 21.7 in x 43.3 in (D x W x H)
Peso	25 kg / 55 lb



TECNOIMAGEN

www.tecnoimagen.com.ar | 0810 333 8273