


## Opciones de colores



## Características

Mesilla con estructura de aluminio anodizado, modular mediante paneles laterales con recubrimiento laminado, ensamblados sin encolado que le aportan una estética innovadora y una gran ligereza.

- ③ Tapas superior e inferior en ABS texturizado, fácilmente limpiables. Tableros de MDF con recubrimiento melamínico y cantos de PVC. Cajón "monoblock" de polipropileno, ligero y de fácil limpieza y mantenimiento.
- ③ 4 ruedas dobles giratorias con freno, de Ø65 y banda de goma en termoplástico. Le aportan facilidad de uso, seguridad y manejo silencioso.
- ③ Rejilla de ventilación en la parte trasera. Huevo para revistero y balda interior. Esquinas y cantos redondeados. Tiradores ergonómicos de zamak.
- ③ Fácil limpieza.
- ③ Personalizable según cliente.
- ③ Sistema de mesa auxiliar que se acopla a la mesilla que permite a esta adaptarse a la cama dependiendo de la altura a la que se encuentre.

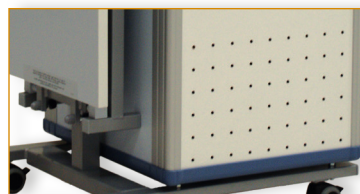

## Información técnica

Dimensiones de la estructura:

Ancho (A)	570 mm. ±10 mm.
Alto (B)	810 mm. ±10 mm.
Alto total (C)	1245 / 945 mm. ±10 mm.
Profundidad (D)	450 mm. ±10 mm.
Ancho del mueble (E)	520 mm. ±10 mm.
Altura del mueble (F)	700 mm. ±10 mm.

Dimensiones del tablero:

Largo (G)	650 mm. ±10 mm.
Ancho (H)	380 mm. ±10 mm.

