

COMEN

	Altura ajustable	Altura fija
Modelo	BC-107	BC-108
Lavabo transparente para bebé	✓	✓
Colchón	✓	✓
Ruedas con freno	✓	✓
Cesta de almacenamiento	✓	✓
Levantamiento de cama	✓	×
Inclinación de cama	✓	✓
Peso	17.5kg	15.0kg
Rango de altura (no incluye colchón)	760mm-900mm	860mm
Sostenedor de la cama	10kg	
Tamaño de la cama	860mm*510mm*260mm (L*A*A)	
Grupos aplicables	Recién nacidos, bebés (0-5 meses o bebés menos de 70 cm de alto)	



CE

BC-107/108 Cuna Infantil

Sueño más seguro. Cuidado más sencillo



Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.

Add: Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, 518106, P.R. China

Tel:+86-755-2640 8879 Fax:+86-755-2643 1232 Sitio web: en.comen.com Correo electrónico: info@szcomen.com

P/N: ES-BC-107/108-4P-20210603-V1.3



Segura y durable

La estructura es estable y confiable. Incluso se inclina hasta el ángulo máximo de 12, la estructura estable protege el moisés de caídas. La vida útil del levantamiento/la inclinación está por encima del promedio de la industria, lo que significa una mayor estabilidad y un funcionamiento más seguro.

Agradable a la piel y comfortable

Adecuado para recién nacidos y bebés de 0 a 5 meses (o menos de 70 cm de alto). La cuna está hecha de material ecológico ABS, impermeable y transpirable, permitiendo que el bebé se desarrolle con tranquilidad. Hay dos tipos de colchones para elegir. El colchón con cubierta impermeable cumple con el estándar de biocompatibilidad.




Fuerte y confiable

Para proteger la seguridad del bebé, utilizamos acero al carbono de alta calidad para el marco de la cama, el cual es fuerte y resistente a la deformación.

Diseño minucioso

La manija de apriete permite que la cama del moisés se incline en cualquier ángulo entre 0° a 12°, evitando la regurgitación de la leche a la vez que disminuye los problemas para las madres.

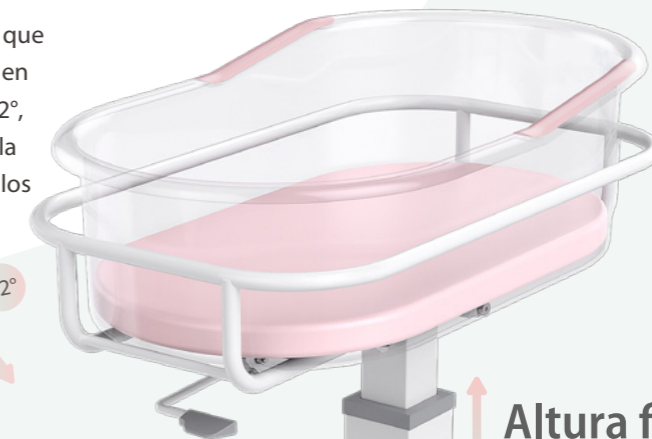

Visión clara

Las paredes laterales transparentes proporcionan a la madre una vista fácil y clara del bebé, permitiendo el contacto visual. Con un buen diseño y un fino material, es la mejor elección para el cuidado del bebé.

Altura flexible

La altura flexible puede satisfacer diferentes necesidades de cuidado.

Almacenamiento conveniente

Cuenta con amplio espacio, fácil desinfección, la canasta permite que la atención del bebé esté dentro del alcance.



Tranquila y estable

Las ruedas médicas con freno permiten que el bebé duerma apacible y dulcemente, incluso durante el traslado.

TECNOIMAGEN

www.tecnoimagen.com.ar | 0810 333 8273