


Sillón Ginecológico CE-1260



Compás



Motor lineal

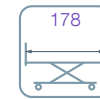

Longitud total



Anchura total



Alturas del
asiento




N° cuerpos



Trendelenburg



Inclinación

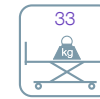

Peso



MPW

Características

Sillón ginecológico, especialmente diseñado para su uso en hospitales y clínicas para el reconocimiento ginecológico de mujeres. Gracias a su versatilidad, este sillón sirve además de camilla de reconocimiento. Algunas de sus características principales son:

Regulación de altura:

Posibilidad de regular la altura del sillón según el paciente, mediante motor eléctrico de accionamiento por mando de control.

Siendo para el paciente más cómodo acceder a él y para el trabajador a la hora de trabajar.

Respaldo:

Tramo respaldo elevable y reclinable motorizado, con accionamiento mediante mando de control, independiente del tramo de extremidades.

Extremidades:

Tramo de extremidades elevable y reclinable por accionamiento manual, mediante palancas, independiente al resto de secciones.

Trend compensado:

Posición trendelenburg mediante accionamiento eléctrico, para garantizar la resistencia y la estabilidad que requiere una situación de emergencia.

Estructura:

Estructura resistente realizada en tubo de acero con recubrimiento de epoxi-poliéster que lo protege contra la oxidación.

Diseñada con cantos redondeados para evitar lesiones tanto en el paciente como en el personal médico

Tapizado:

Tapizado en polipiel (antimicrobiana, impermeable e ignífugo según la norma UNE EN 1021/ Parte 1 y 2) priorizando la comodidad del paciente, la limpieza y la protección del sillón.

Ruedas (opcional):

Sistema de cuatro ruedas escamoteables mediante pedales, para mayor maniobrabilidad del sillón.

Otras mejoras:

Perneras ginecológicas, fabricadas en polipiel, regulables en altura y giratorias manualmente.

Almohada cervical ergonómico ajustable.

Cubeta de acero inoxidable extraíble, para deshechos, colocada debajo del asiento.

Accesorios:

Portarrollos

Portasuero

Estriberas



Sillón Ginecológico CE-1260



TECNOIMAGEN
www.tecnoimagen.com.ar | 0810 333 8273

Información técnica

Longitud total en posición sentado	1250 mm. ± 10 mm.
Longitud total en posición tumbado	1780 mm. ± 10 mm.
Altura de la superficie de descanso (posición baja)	500 mm. ± 10 mm.
Altura de la superficie de descanso (posición alta)	900 mm. ± 10 mm.
Anchura de la superficie a sentarse	620 mm. ± 10 mm.
Inclinación máxima del respaldo (respecto del asiento)	85° ± 5°
Inclinación mínima del respaldo (respecto del asiento)	-10° ± 5°
Inclinación máxima de los pies (respecto del asiento)	10° ± 5°
Inclinación mínima de los pies (respecto del asiento)	-90° ± 5°
Trendelemburg	-10° ± 5°.
Peso del sillón	62 kg.
Peso máximo de paciente (MPW)	180 kg.

Información eléctrica

Elevación	Mediante motores lineales
Elevación respaldo	Mediante motor lineal
Tensión y frecuencia	220 V / 50 Hz
Protección penetración de líquidos	IP25


Tapizados

Valencia



Estándar

Controles

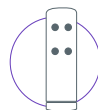

Mando paciente

Transporte



Patas


Reposabrazos

Bienestar



Perneras

Otros

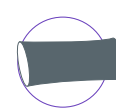


Cojín cervical

Accesorios



Portasueros

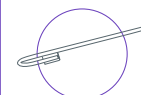

Portarrollos



Estriberas

Opcional

Controles



Mando de pie

Transporte



Ruedas escamoteables

Reposabrazos



Abatibles 180°

Bienestar



Altura hidráulica



Teja, para extracciones



Piecerca extraíble



Regulable en altura