

GentleLase Pro™

Más rápido.

Más eficaz.

Más versátil.



Science. Results. Trust.



“Candela ha mejorado el que ya era el mejor láser de depilación. Es más rápido, ofrece más posibilidades con una mayor duración de pulso, una interfaz de usuario más sencilla y más facilidad en el cambio del tamaño de spot, es mejorar un producto ya estupendo.”

Stephen W. Eubanks, M.D., Centro de láser y dermatología en Harvard Park, Colorado

GentleLase ProTM

Tecnología punta, reimaginada

GentleLase PRO representa la reinención del principal láser de depilación, lesiones pigmentadas epidérmicas y anomalías vasculares, así como la reducción de arrugas. Es más rápido e incorpora características más avanzadas para continuar proporcionando resultados superiores y ganar la confianza de los profesionales y pacientes de todo el mundo.

Más rápido

Una frecuencia de repetición mejorada de 2 Hz le permite tratar a más pacientes en menos tiempo.

Elección de sistemas de administración

Elija entre distintas piezas de mano ergonómicas y sistemas de aplicación más ligeros para minimizar la fatiga y hacer más cómodos los tratamientos.

Múltiples tamaños de spot

Tamaños de 6, 8, 10, 12, 15, y 18 mm que otorgan al láser GentleLASE los tamaños anatómicamente adecuados y la posibilidad de aplicar fluencias mayores.

Pantalla táctil intuitiva

Rediseñada para ayudarle a seleccionar y guardar fácilmente los parámetros de tratamiento.

Duración del pulso variable

Para una mayor flexibilidad del tratamiento al tratar la epidermis.


Sistemas de refrigeración a la carta

Elija entre el Air Cooling Compatible™ (ACC™) o el sistema de refrigeración Dynamic Cooling Device™ (DCD™) que utiliza criógeno.

Diseño inteligente y elegante

Líneas suaves y modernas, ocupa poco, y es ligero, facilitando su traslado. Tratamientos cómodos, rápidos y efectivos en casi cualquier entorno.

GentleLase Pro™

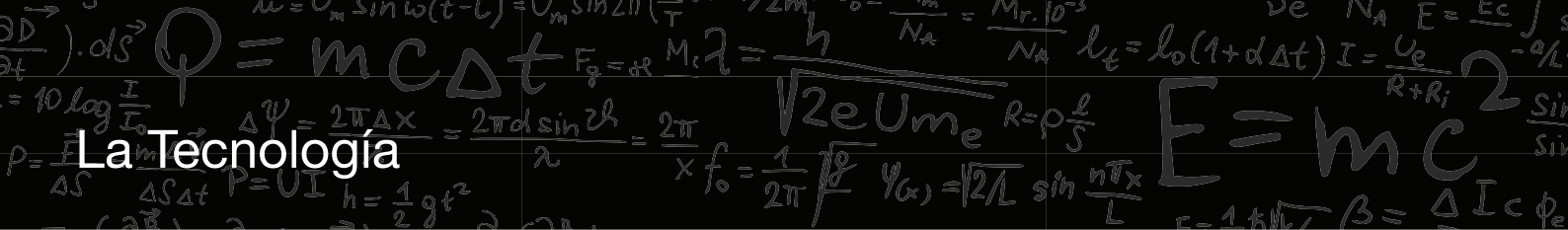

La Tecnología

“Tengo entre 20-30 láseres distintos y muchos de ellos sirven para depilación, pero sigo utilizando el GentleLASE. Continúa siendo mi láser preferido para depilación, independientemente de cuántos láseres de depilación haya probado.”

Thomas E. Rohrer, M.D., SkinCare Physicians of Chestnut Hill, Massachusetts

Mejore su consulta con la calidad de Candela

El único láser de depilación que proporciona varias opciones para proteger la epidermis –criógeno o refrigeración por aire– aplica energías máximas manteniendo la eficacia en los tratamientos.

La avanzada tecnología y las características mejoradas del GentleLASE PRO lo convierten en el láser por excelencia para tratamientos precisos y no invasivos.

Versatilidad del GentleLASE PRO

La tecnología GentleLASE PRO le permitirá tratar mucho mejor el vello no deseado. Profesionales de todo el mundo nos comunican su éxito en el tratamiento de diversos tipos de pelo y piel. Algunos profesionales lo utilizan para lesiones pigmentadas y rejuvenecimiento facial, con resultados visibles en el tratamiento de:

- Depilación en todo tipo de pieles
- Lesiones pigmentadas epidérmicas – entre otras:
 - Piel dañada por el sol
 - Manchas de edad
 - Pecas
- Eliminación de anomalías vasculares
 - Venas en las piernas
 - Venas faciales
- Reducción de arrugas

Refrigeración protectora a la carta

Dos sistemas de refrigeración – Air Cooling Compatible (ACC), que ofrece un flujo de aire a baja temperatura, o el Dynamic Cooling Device (DCD™) patentado por Candela que aplica criógeno, casi a la vez que el pulso del láser. La posibilidad de ofrecer varias alternativas de refrigeración, es lo que distingue al GentleLase Pro de otros láseres Alejandrita.



Cryogen-Based Dynamic Cooling Device Handpiece



Air Cooled Compatible Handpiece

Resultados clínicos



Antes



Después del tratamiento

Fotos cortesía de Marcelle C. Kutun, M.D., CME, CLS, CLP.



Antes



Después del tratamiento

Fotos cortesía de Jonathan S. Crane, D.O.




Antes




Después del tratamiento

Fotos cortesía de Münewver Ercan, M.D.

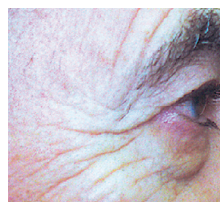

Antes

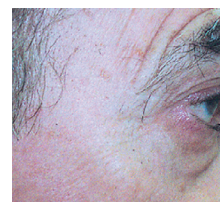

Después del tratamiento

Fotos cortesía de Jonathan S. Crane, D.O.



Antes



Después del tratamiento

Fotos cortesía de Christine Dierickx, M.D.

GentleLase Pro™

Tecnología de vanguardia, reimaginado

Especificaciones del sistema

Tipo de láser	Láser de Alejandrita de pulsado largo excitado por lámpara de flash
Longitud de onda	755 nm
Repetición	Hasta 2 Hz
Duración del pulso	3 a 300 ms
Tamaños de spot (diámetro)	6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm
Intervalo de fluencia	Hasta 150 J/cm ²
Administración de luz	Acoplada por lente, fibra óptica de 2,5 m con pieza de mano
Control del pulso	Interruptor manual y de pedal
Dimensiones	42,6" H x 19,9" W (con pistolera) x 36,9" D (108,2 cm x 50,5 cm x 98,8 cm)
Peso	107 kg (237 lbs)
Electricidad	230 V 50/60 Hz, monofásico, 20 A o 30 A
Sistemas opcionales de refrigeración epidérmica	
Dynamic Cooling Device (DCD)	Controles integrados, recipiente de criógeno y pieza de mano con distanciador
• Criógeno	HFC 134a
• Duración de la pulverización del DCD anterior	Intervalo regulable por el usuario: 20 a 100 ms
• Duración de la demora del DCD	Intervalo regulable por el usuario: 3, 5, 10 a 150 ms
• Duración de la pulverización del DCD posterior	Intervalo regulable por el usuario: 0 a 100 ms
Sistema de refrigeración Air Cooling Compatible™ (AAC)	Ajuste el flujo a la temperatura indicada (a menudo 0° C)





Science. Results. Trust.

Syneron y Candela son los líderes mundiales en el mercado de los equipos médico-estéticos.

Somos una compañía con dos marcas independientes. Combinamos un nivel de innovación, experiencia y entendimiento del cliente superior a la de cualquier otra compañía de la industria.

La estabilidad financiera, a través de la unión de nuestros recursos, permite a la nueva compañía ofrecer a nuestros clientes la más amplia cartera de productos, la mejor organización de servicio integral y una red de distribución mundial en expansión.

Juntos somos más capaces que nunca de responder al mercado. Sabemos cómo innovar rápidamente los productos más seguros y efectivos para satisfacer la demanda actual. Nos anticipamos a las futuras tendencias del mercado para ayudar a nuestros clientes y a sus pacientes. Con nuevas y revolucionarias tecnologías en desarrollo, nuestra posición es ideal para mantener el liderazgo mundial y continuar haciendo crecer su consulta.

Syneron y Candela disponen de oficinas y distribuidores en todo el mundo.