

**LA SOLUCIÓN MÁS RENTABLE**

**EN DEPILACIÓN**



  
**VENUS VELOCITY**



# VENUS VELOCITY

Venus Velocity™ es un láser de diodo para depilación, el "Gold Standard" en eficacia y seguridad, que le ofrece un mayor retorno de su inversión (ROI). Es más versátil y fácil de usar que cualquier otro dispositivo y proporciona tratamientos más rápidos, cómodos y seguros para todo tipo de piel.

## AVANZADA TECNOLOGÍA LÁSER

Con una óptima longitud de onda de 800nm, una potencia máxima de 2.400 vatios y su alta densidad de energía de hasta 100 J/cm<sup>2</sup>, Venus Velocity™ se convierte en líder absoluto en el uso de láser de diodo para depilación, reducción del vello permanente y tratamiento de la pseudofoliculitis barbae.

## UN SISTEMA VERSÁTIL Y FÁCIL DE USAR

Tiene dos modos de operación (DESLIZADO y PULSO), tres tamaños de puntas intercambiables, diferentes parámetros preestablecidos, aplicador ergonómico y una interfaz fácil de usar, adaptable y muy cómoda para su operación.

## TRATAMIENTO ULTRA RÁPIDO

La frecuencia de repetición puede subir hasta 10Hz, el máximo tamaño de spot es de 7 cm<sup>2</sup> y en modo DESLIZADO, proporciona tratamientos mucho más rápidos que se traducen en mayor volumen de pacientes.

## CÓMODO PARA TODO TIPO DE PIEL

Seguro para todo tipo de piel, incluso la piel bronceada. Su sistema avanzado de enfriamiento en tiempo real y el modo DESLIZADO de operación, le ofrecen al paciente una sensación agradable.

## UN SISTEMA MÁS RENTABLE

Venus Concept ofrece un modelo de negocio único, con un precio razonable, una mayor garantía, sin piezas desechables y una efectiva integración vía internet (IoT) que aseguran un retorno aún mayor.






¿POR QUÉ VENUS VELOCITY ES EL

NUEVO "GOLD STANDARD"?

## UN SISTEMA POTENTE Y EFICIENTE

La tecnología láser de diodo logra que longitudes de onda menores lleven a mayores absorciones de energía del cromóforo de la melanina, la cual es la única manera segura y efectiva para las pieles claras. Aunque las longitudes de onda mayores también son seguras para tipos de piel oscuras, no son tan efectivas debido a la baja absorción de energía. Con una longitud de onda de 800nm, Venus Velocity™ alcanza un balance óptimo entre, alta absorción de energía de cromóforos de la melanina y una penetración profunda en la piel, haciendo que sea un método seguro y efectivo para todo tipo de piel, incluyendo las pieles bronceadas. La alta densidad de energía de hasta 100 J/cm<sup>2</sup> y la máxima potencia de 2.400 vatios, hacen que Venus Velocity™ sea un sistema de depilación altamente eficiente.

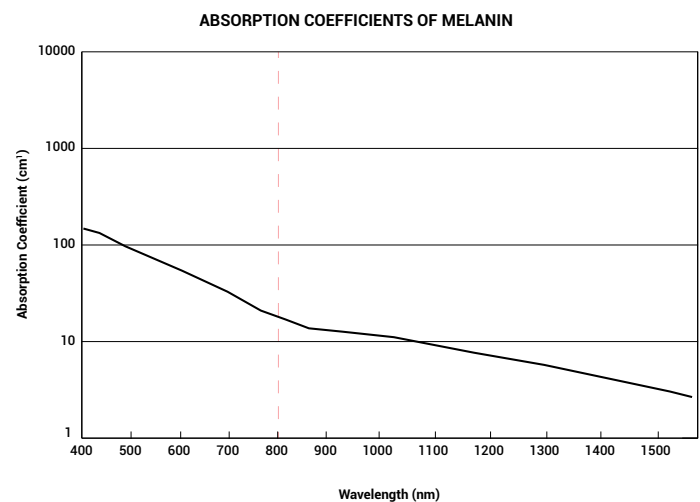

Fuente: Ash, Caerwyn, entre otros. "Mathematical modeling of the optimum pulse structure for safe and effective photo epilation using broadband pulsed light." *Journal of Applied Clinical Medical Physics* 13, no. 5 (2012). Consultado el 23 de noviembre, 2016. <http://www.jacmp.org/index.php/jacmp/rt/printFriendly/3702/2655>.

# APLICADOR ERGONÓMICO CON TRES TAMAÑOS DE PUNTAS INTERCAMBIABLES

Lo que realmente diferencia a Venus Velocity™ es su adaptabilidad ya que puede escoger entre sus tres puntas intercambiables con diferente tamaño de spot: una grande de 7 cm<sup>2</sup>, mediana de 3.5 cm<sup>2</sup> y pequeña de 1.7 cm<sup>2</sup>. A diferencia de otros sistemas que requieren múltiples o voluminosos aplicadores y costosas piezas de repuesto para las partes intercambiables, cada punta de Venus Velocity™ encaja perfectamente en su sencillo aplicador, haciéndolo mucho más fácil y cómodo de usar. El aplicador está diseñado de tal manera que se adapta rápidamente para ser operado con la mano izquierda o derecha, por largos periodos de tiempo y con menor riesgo de lesión por esfuerzo repetitivo o cansancio.




punta 7 cm<sup>2</sup>



punta 3.5 cm<sup>2</sup>



punta 1.7 cm<sup>2</sup>

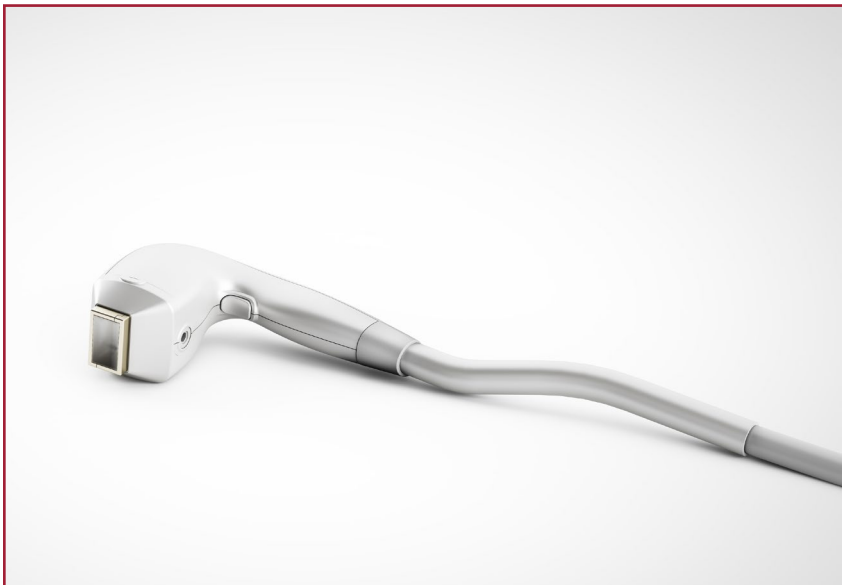




## VERSATILIDAD GRACIAS A SUS DOS MODOS DE OPERACIÓN DESLIZADO Y PULSO

Venus Velocity™ viene con dos modos diferentes de operación: DESLIZADO y PULSO. A diferencia de otros sistemas de láser de diodo que únicamente traen uno de los dos, Venus Velocity™ permite que el operador elija entre ambas opciones, dependiendo de las necesidades individuales de cada paciente.


El modo **PULSO** permite aplicar mayores cantidades de energía en el tejido con una frecuencia más baja de repeticiones, resultando en una mayor eficacia clínica y menos sesiones de tratamiento. El modo **DESLIZADO** usa una frecuencia más alta de repeticiones, pero con impulsos cortos, alcanzando una mayor potencia en promedio, mientras que el operador desliza el aplicador sobre el área tratada de manera constante y suave. Esto asegura que todo el tratamiento sea prácticamente sin dolor para el paciente.

Esta capacidad única de poder elegir entre cualquiera de los dos modos de operación, proporciona una versatilidad incomparable en tratamientos de depilación. Además, la frecuencia de repetición también puede ser ajustada para proporcionar una solución aún más personalizada para el tratamiento específico de cada paciente y su nivel de comodidad durante el tratamiento.

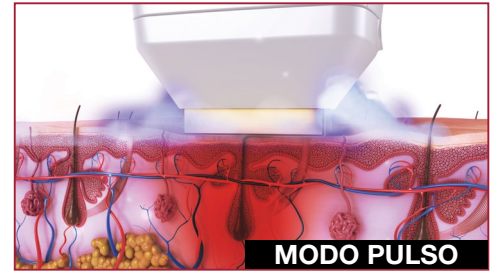

## REVOLUCIONARIO SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN TIEMPO REAL


Nuestro moderno e innovador sistema de enfriamiento en tiempo real, monitorea la temperatura del aplicador 1.000 veces por segundo para poder mantenerla dentro de los parámetros de seguridad y comodidad de cada paciente. Gracias al permanente proceso de enfriamiento, la temperatura es controlada durante toda la sesión, lo que permite que el paciente reciba un tratamiento casi sin dolor, incrementando su conformidad, satisfacción y demanda. De la misma manera, al no tener que esperar para el enfriamiento, se aumenta la frecuencia de su uso y por consiguiente la productividad de su clínica.

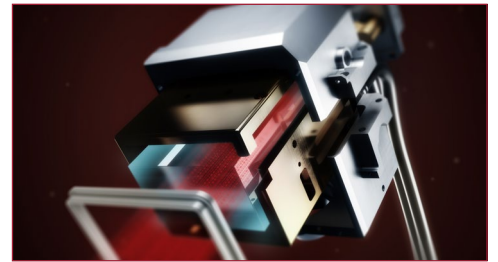

## TECNOLOGÍA IOT INTEGRADA

El concepto "Internet de las Cosas" (IoT por sus siglas en inglés) es lo último en tecnología para mejorar las operaciones comerciales en diferentes industrias. Venus Velocity™ es el primer y único dispositivo en la industria de la medicina estética que viene equipado con la tecnología IoT. Esto ayudará a optimizar desde los protocolos de tratamientos hasta los resultados de los pacientes y su satisfacción.

La tecnología IoT suministra información permanentemente para maximizar la eficiencia del tratamiento y poder alcanzar un mejor Retorno de Inversión (ROI). Además, asegura que mantendremos su dispositivo funcionando en el más alto y óptimo nivel de desempeño. Con la tecnología IoT integrada en Venus Velocity™, Venus Concept se pone a la vanguardia como la única empresa que proporciona este avanzado nivel de apoyo para mejorar el desempeño de su negocio.

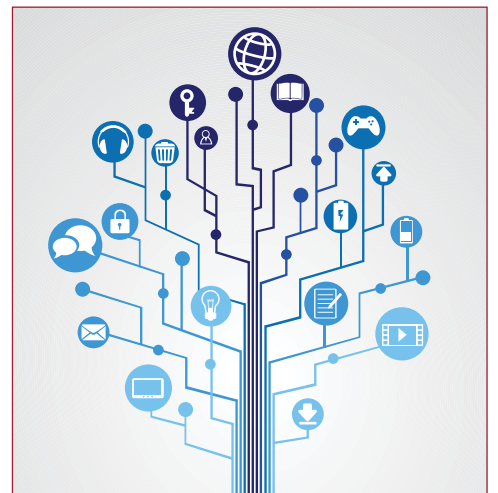




# UNA ALIANZA QUE FUNCIONA PARA USTED

Tecnología innovadora con un modelo de negocio único

Cuando usted elige Venus Velocity™, se está asociando con Venus Concept. Nuestro modelo de negocio único en la industria, está diseñado para incrementar aún más el éxito de su negocio.

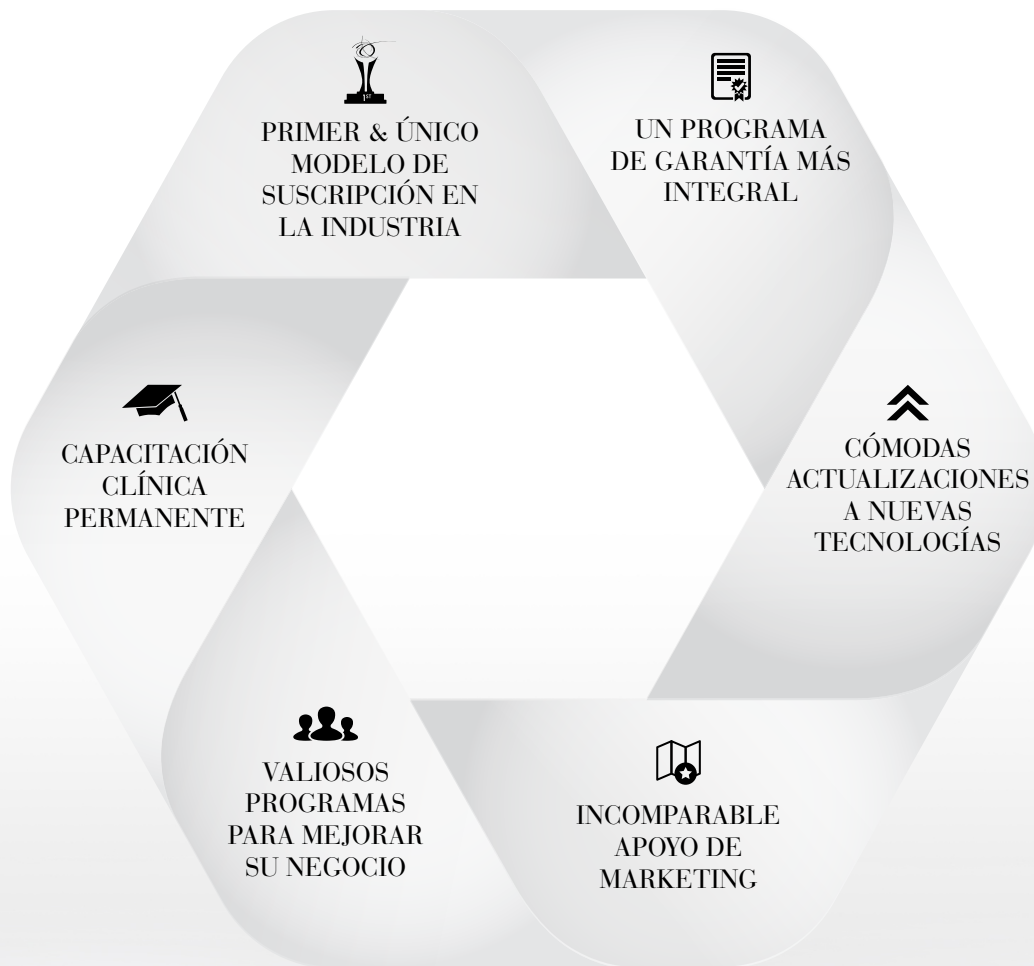

# UNA ALIANZA QUE FUNCIONA PARA USTED

Tecnología innovadora con un modelo de negocio único

Con el modelo de negocio único de Venus Concept, un precio razonable, una mayor garantía, un producto sin piezas desechables y la integración de la tecnología IoT, Venus Velocity™ se convierte en el sistema para depilación más rentable que existe en el mercado hoy en día.



## PRIMER & ÚNICO MODELO DE SUSCRIPCIÓN EN LA INDUSTRIA

Plan de pago completamente personalizable que satisface las necesidades de su negocio

Plan de pago sin intereses

Planes de pago personalizados

Rápido proceso de aprobación

Propiedad total después de completar la suscripción



## UN PROGRAMA DE GARANTÍA MÁS INTEGRAL

Garantía líder en la industria, diseñada especialmente para proteger contra fallas imprevistas en la tecnología durante todo el período de vigencia de su contrato

Soporte telefónico y solución de problemas

Rápida respuesta

Soporte técnico de expertos



## ACTUALIZACIONES FÁCILES A NUEVAS TECNOLOGÍAS

Actualizaciones fáciles a nuevas tecnologías y descargas de software gratuitas

Acceso rápido y fácil a tecnologías más modernas

Tomamos su equipo usado en parte de pago

Evita la obsolescencia tecnológica



## VALIOSOS PROGRAMAS PARA MEJORAR SU NEGOCIO

Programas de mejora para proporcionar soporte continuo para todos los aspectos de su negocio

Expertos de marketing a su servicio

Estrategias de desarrollo de negocio

Apoyo de marketing para su clínica



## INCOMPARABLE APOYO DE MARKETING

El único equipo de marketing interno para ayudarle a promocionar su dispositivo de Venus Concept

Publicidad personalizada para su negocio

Herramientas para la educación del paciente

Perfil personalizado a su negocio en nuestro Buscador de Clínicas



## CAPACITACIÓN CLÍNICA PERMANENTE

Educación y apoyo clínico disponibles cuando lo necesite

Acceso 24/7 a capacitación clínica avanzada

Programas educativos permanentes en nuevas técnicas y protocolos de tratamientos

Educación liderada por un equipo de expertos

# ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje de entrada	100-230 VAC, menor que 12A, 50-60 Hz, fase sencilla
Longitud de onda	800 ± 15 nm
Máx. potencia	2.400 vatios
Tamaño de spot	Punta grande: 7.0 cm <sup>2</sup> (2.0 cm x 3.5 cm) Punta mediana: 3.51 cm <sup>2</sup> (1.3 cm x 2.7 cm) Punta pequeña: 1.69 cm <sup>2</sup> (1.3 cm x 1.3 cm)
Fluencia	Punta grande: 4-20 J/cm <sup>2</sup> Punta mediana: 6-40 J/cm <sup>2</sup> Punta pequeña: 6-100 J/cm <sup>2</sup>
Tasa de repetición	Hasta 10 Hz
Duración de pulso	5-170 ms
Dimensiones	55 cm x 65 cm x 110 cm / 21.7 in x 25.6 in x 43.3 in (D x W x H)
Peso	35 kg / 77.2 lb



**TECNOIMAGEN**

[www.tecnoimagen.com.ar](http://www.tecnoimagen.com.ar) | 11-4582-2222