

## LA PLATAFORMA LÁSER DE LOS EXPERTOS


La plataforma xeo® multi-aplicación entrega más configuraciones y parámetros de tratamiento para tratar la más amplia gama de condiciones de manera perfecta.



xeo™

## EL PODER DE UNA PLATARFORMA LÁSER

La selección de una plataforma estética es una inversión a largo plazo, Por eso hicimos de xeo® la estación de trabajo estética más versátil y customisable en su clase. Seleccione entre múltiples tecnologías, personalice sus opciones en función de sus necesidades actuales y disfrute de la flexibilidad necesaria para diversificar su portafolio de procedimientos.

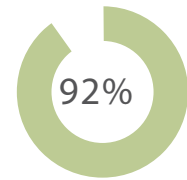

De los tratamientos mas comunes pueden ser tratados con XEO

### xeo Nd:YAG

LÁSER Nd:YAG (1064 nm)

Trata una amplia gama de condiciones con la longitud de onda que CUTERA sabe mejor que nadie. El Nd: YAG original optimizado para la depilación, lesiones vasculares y el procedimiento de láser de CUTERA genesis™

### xeo REVITALIZANTE

IPL (500~1800 nm)

El completo menú de opciones IPL de xeo ofrece una gama completa de tratamientos asociados con signos de foto- envejecimiento, como líneas finas y arrugas, discromias y otras imperfecciones de la piel.

### xeo REJUVENECIMIENTO

LÁSER Er:YSGG (2790 nm)

Las opciones de rejuvenecimiento de xeo son la combinación perfecta de coagulación + ablación para rejuvenecimiento de la cara completa y con una longitud de onda láser única perfectamente optimizada para ambos.

## TECNOLOGÍA truPulse™

Entrega energía consistente y prolongada para la máxima eficacia de tratamiento pulso tras pulso



XEO™



laser genesis



laser genesis



laser genesis

# EL VALOR DE UNA PLATARFORMA LÁSER


Personalizar tu xeo no significa solo añadir nuevas opciones. Si bien cada opción de pieza de mano proporciona resultados autónomos eficaces, los tratamientos de combinación proporcionan sinergias de tratamiento a pacientes con una amplia gama de preocupaciones estéticas.



## xeo 2D

limelight® + laser genesis™

Disminuye las manchas marrones, enrojecimiento, cicatrices y otras formas de imperfecciones de la piel con xeo 2D un procedimiento no invasivo, no hay tiempo de inactividad combinando el centro de atención de xeo y la génesis del láser.

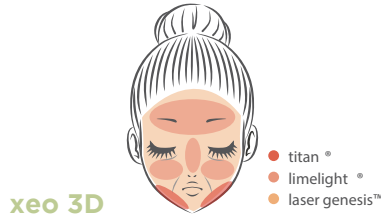

## xeo 3D

titan® + limelight® + laser genesis™

Eliminar eficazmente los signos más comunes del envejecimiento, como enrojecimiento facial, lesiones pigmentadas benignas y arrugas, con xeo 3D un procedimiento de triple fuerza usando el titan de xeo, el Limelight y el láser genesis.






## xeo FUSION

pearl® + pearl® fractional

Elimine rápidamente las arrugas profundas y el foto daño epidérmico. Combine los procedimientos pearl y pearl fraccional para obtener resultados superiores en un solo tratamiento.

## TRATAMIENTOS

OPCIONES	TIPO DE PIEL	OPCIONES DE TRAT.	Vello	Pigmentación	Vascular	Rejuvenecimiento	Revitalización	Calentamiento dérmico profundo	Arrugas
Nd:YAG 	I-VI	22	●	●	●		●		●
limelight® 	I-IV	10		●	●		●		
prowave LX™ 	I-IV	1	●						
titan® 	I-IV	1						●	
acutip™ 	I-IV	8		●	●				
pearl® 	I-III	5				●			●
pearl® fractional 	I-III	10				●			●



pearl fractional



xeo 3D



xeo FUSION

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Nd:YAG	limelight <sup>®</sup>	prowave LX <sup>™</sup>	acutip <sup>™</sup>	titan <sup>®</sup>	pearl <sup>®</sup>	pearl <sup>®</sup> fractional
Longitud de onda	1064 nm	520-1100 nm	680-1100 nm	500-635 nm	1100-1800 nm	2790 nm	2790 nm
Rango de energía	300 J/cm <sup>2</sup>	5-30 J/cm <sup>2</sup>	35 J/cm <sup>2</sup>	3-24 J/cm <sup>2</sup>	5-65 J/cm <sup>2</sup>	1.5-3.5 J/cm <sup>2</sup>	60-320 mJ <sup>2</sup>
Duración del pulso	0.3-300 ms		1-60 ms			300-500 ms	500 ms
Tasa de repetición	10 Hz	2 Hz	2 Hz	1 Hz		20 Hz	
Tamaño del punto	3, 5, 7, 10 mm	10 x 30 mm	10 x 30 mm	6.35 mm	10 x 15, 30 mm	6 mm	300 micron
Enfriamiento	Gold Plated	Contact	Contact	Contact	Contact	Contact	Contact
Diimensiones	12.5" W x 35" H x 19" D						
Peso	135 lbs.						
Voltaje	115 V, 20 A or 230 V, 20A						

CUTERA<sup>®</sup>

TECNOIMAGEN

[www.tecnoimagen.com.ar](http://www.tecnoimagen.com.ar) | 11-4582-2222