

ANTES Y DESPUÉS

ALISADO Y ENDURECIMIENTO PERIORBITARIO




DR. B. FORLEY

ENDURECIMIENTO ABDOMINAL




DR. T. SHIMER

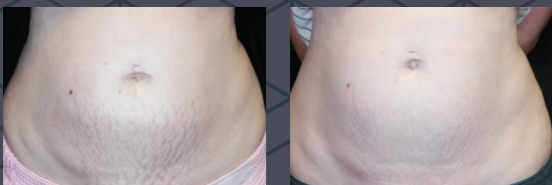

DR. T. SHIMER

RODILLAS

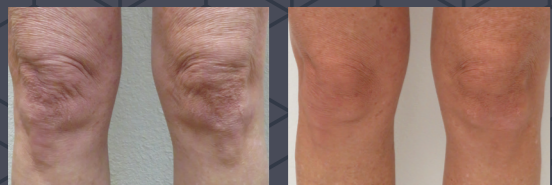


DR. G. STEVENS

AXILAS



DR. G. STEVENS

ESTIRAMIENTO DEL CUELLO

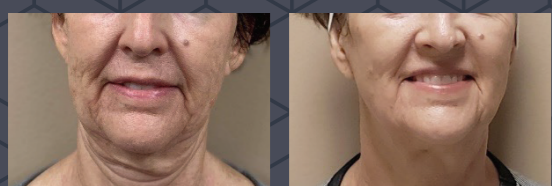

DR. D. PROKUPEK



DR. C. MIZGALA

RESULTADOS CLÍNICOS

Durante más de dos décadas, InMode ha revolucionado la industria de la medicina estética con tecnologías de última generación. InMode ahora tiene más de 50 publicaciones revisadas por pares y libros de texto, liderando la industria en excelencia clínica.



INMODE

TECNOIMAGEN

el nuevo



MORPHEUS PRO

by INMODE



REMODELACIÓN FRACCIONADA
DE CUERPO COMPLETO

MORPHEUS8

BENEFICIOS

- Realiza un tratamiento profundo y fraccionado con penetración programable de 1 a 7 mm, según la configuración.
- Los micropíns recubiertos de polímero aseguran que prácticamente no se produzcan daños térmicos en la epidermis.
- Trata de forma segura la piel tipo VI con poco riesgo de PIH.
- La punta desechable evita la contaminación cruzada.
- El diseño de celosía avanzada de los electrodos de retorno crea un efecto uniforme.



Morpheus PRO proporciona la remodelación de tejido adiposo subdérmico para rostro y cuerpo más profunda del mercado. Es la mejor penetración de microagujas en su clase que aprieta el tejido blando a través de la coagulación del tejido adiposo superficial subdérmico y red fibroseptal (fsn).

TESTIMONIOS



DRA. ANA REVUELTA (MORPHEUS 8)

“Morpheus es la tecnología de radiofrecuencia fraccionada más profunda con una penetración de 4mm y un efecto térmico de hasta 6 mm, no solamente nos permite una regeneración de colágeno y elastina con retracción del tejido y mejora de la laxitud de la piel, sino que si le sumamos la patología de la celulitis a tratar vamos a conseguir eliminar los acúmulos de grasa correspondientes a los compartimentos de tejido conectivo.”**1



DR. XAVIER SÁNCHEZ TARRAGÓ

“Podemos decir que Morpheus8 es el primer y único dispositivo de radiofrecuencia fraccionada del mundo que actúa sobre la grasa subdérmica, lo que permite la transformación de las facciones envejecidas de la piel en facciones rejuvenecidas. Sus ondas penetran a mayor profundidad que otras radiofrecuencias y tiene un nivel de energía programable que permite adaptar el tratamiento a las necesidades de cada paciente.”**2

**1 Testimonio y foto cortesía de InMode


**2 Foto del doctor. fuente: cortesía de IDERMA - INSTITUTO DE DERMATOLOGIA AVANZADA- BARCELONA- ESPAÑA

ESPECIFICACIONES


- NÚMERO DE PINS** 12, 24, 40 agujas afiladas recubiertas de polímero (excepto punta distal de 0,5 mm)
- MODOS DE OPERACIÓN**
 - Ciclo - las agujas penetran y se retraen del tejido con cada pulsación.
 - Fijo - las agujas permanecen sobresalientes y los pulsos de RF se administran con una tasa de repetición predeterminada en el mismo sitio (apilamiento)
 - Ráfaga - las agujas se despliegan y entregan energía RF a múltiples profundidades dentro de un solo ciclo de penetración.
- PERFORMANCE /ACTUACIÓN** La rejilla del electrodo de retorno rodea simétricamente cada aguja para una sincronización uniforme del perfil térmico entre la penetración de las agujas y el suministro de energía de RF

CONFIGURACIONES DE PUNTAS DE TRATAMIENTO

PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN

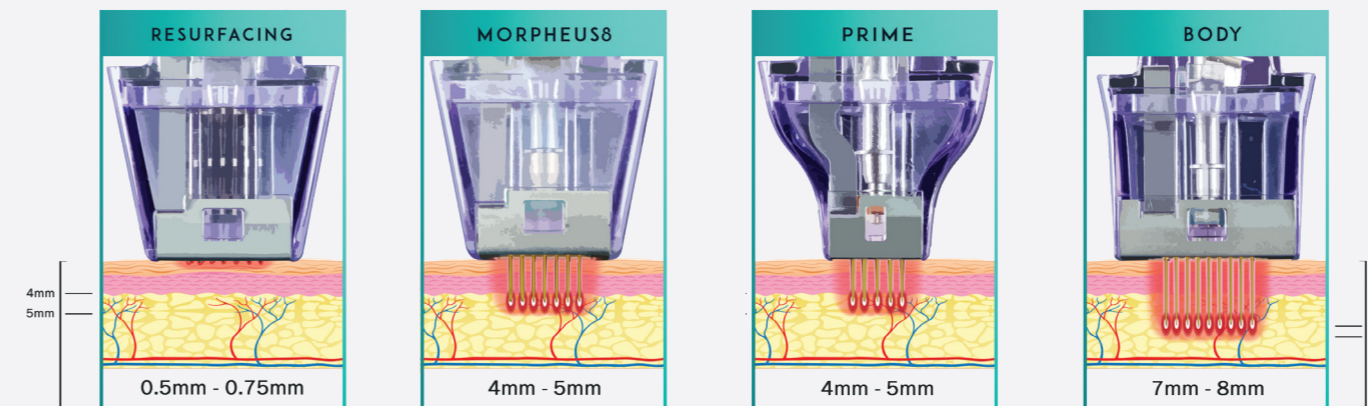

	Prime	Morpheus8	Resurfacing	Body
Especificaciones				
Zonas de tratamiento	Remodelación subdérmica y dérmica de áreas precisas mediante coagulación fraccionada y calentamiento masivo subnecrótico	Remodelación subdérmica y dérmica para cara, cuello y áreas corporales	Rejuvenecimiento epidérmico de la capa superficial de la piel	Remodelación dérmica y subdérmica de grandes áreas corporales como abdomen, muslos y glúteos mediante coagulación fraccionada y calentamiento a granel.
Nº de pins	12 pins revestidos	24 pins revestidos	24 pins revestidos	40 pins revestidos
Profundidad de penetración	1-4mm, programable	1-4 mm con hasta 1 mm de perfil de calor adicional	0,5mm Fijado	2-7mm programable

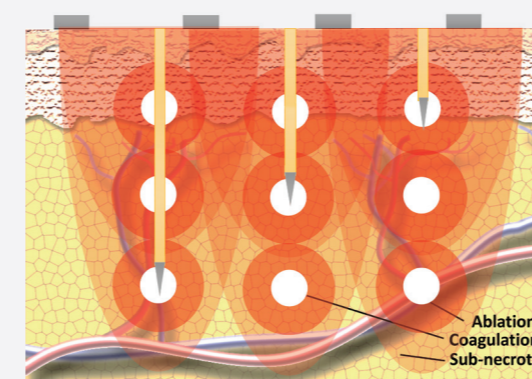

Explosión del cuerpo (? de Morpheus8 Ajustes multipulso personalizables

Especificaciones	Ajuste de ciclo	Ciclo de penetración multinivel
7 mm		7 mm, 5 mm, 3 mm
6 mm		6 mm, 4 mm, 2 mm
5 mm		5 mm, 3 mm
4 mm		4 mm, 2 mm



Morpheus Pro es la plataforma dedicada de InMode para tratamientos fraccionados con el potente y versátil aplicador Morpheus8. Considerada la tecnología de última generación estándar de oro en tratamientos fraccionados, Morpheus8 se ha vuelto muy popular con la experiencia de más de un millón de procedimientos (Morpheus8) realizados con éxito en todo el mundo. Disponible en una variedad de configuraciones de puntas para tratamientos específicos, Morpheus8 es ideal para un régimen completo de remodelación facial y corporal.

- Suaviza y estira las líneas finas y las arrugas.
- Trata las cicatrices atróficas y de acné.
- Mejora el acné activo.
- Suaviza las irregularidades de la piel.
- Mejora el tono de la piel.
- Levanta y contornea la cara, el cuello y las áreas del cuerpo.
- Reduce la apariencia de la celulitis.
- Reduce las estrías.

