



## Características

Los sillones están especialmente diseñados para su utilización en hospitales, clínicas, residencias y también para la asistencia domiciliaria.

El sillón está compuesto por una estructura metálica tubular recubierta de pintura de poliéster, con asiento, respaldo y tramo de piernas tapizados, con posibilidad de hacerlo en diversos colores.

Esta estructura metálica hace que sean robustos y resistentes al uso.

Articula en dos tramos gracias a un amortiguador de gas que es accionado mediante una palanca situada en el lateral del sillón.

Reposabrazos abatibles para permitir el acceso por sus laterales.

Reposapiernas extensible incorporado.

Dependiendo del usuario al que vayan destinados pueden existir diferentes configuraciones del sillón en función de la cantidad de ruedas que lleve o de los accesorios que se le puedan colocar.

### ③ Opciones:

Si el uso es para el paciente se le pueden incorporar accesorios como mesita, portabombonas y portagoterros.



Amortiguador



10  
Ø Ruedas



109  
Longitud total



68  
Anchura total



109  
Altura total



48  
Altura asiento



48  
Anchura asiento



Inclinación




135  
kg  
Peso paciente

## Información técnica

Longitud total en posición sentado (A)	850 mm.
Longitud total en posición tumbado (A*)	1950 mm.
Anchura total con reposabrazos (B)	645 mm.
Altura total (C)	1090 mm.
Altura de la superficie de sentarse (D)	500 mm.
Anchura de la superficie de sentarse (E)	480 mm.
Inclinación del respaldo (respecto del asiento) (F)	110°
Inclinación máxima del respaldo (respecto del asiento) (G)	170°
Peso del sillón	33 - 39 kg. (según modelo)
Peso máximo paciente (MPW)	135 kg.

### Accesorios

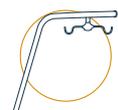





Portasueros



Portabombonas



Mesa auxiliar

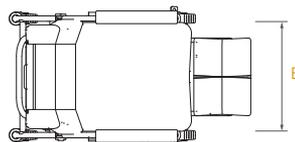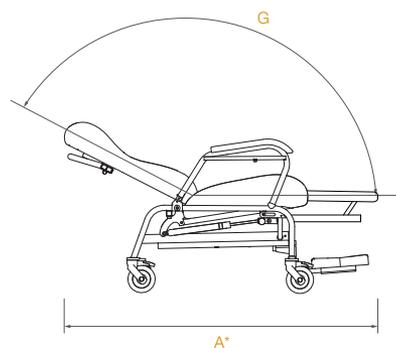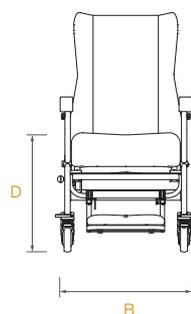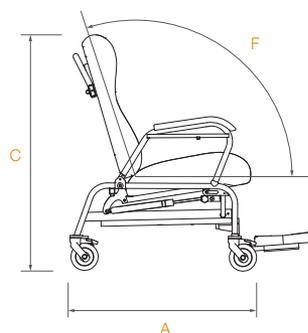

## Tapizado

### Silvertex



Cream



Shiitake



Safran



Orange



Wine



Red



Pistacho



Delft



Sapphire



Titanium

### Valencia



Weiss



Beige



Nectarine



Orange



Rot



Delft



Jade



Laurel




Perle



Titan

### Versión acompañante con patas

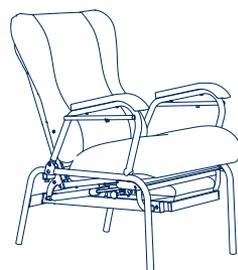

- ③ 4 patas.
- ③ Con asa.
- ③ Sin accesorios.
- ③ Sin reposapiés

### Versión paciente con dos ruedas



- ③ 2 patas.
- ③ 2 ruedas Ø 100 mm.
- ③ Con asa.
- ③ Accesorios opcionales.

### Versión paciente con cuatro ruedas



- ③ 4 ruedas Ø 100 mm.
- ③ Con asa.
- ③ Con reposapiés.
- ③ Accesorios opcionales.