

DEKA
Innate Ability

EL NUEVO **SISTEMA PRO**



again
PRO

¿Cómo **OBTENER** más **RESULTADOS?**

Rendimiento inigualable
en depilación, vascular
y las aplicaciones más estéticas

AGAIN PRO destaca en **Estética** y **Dermatología**



AGAIN PRO

EXCELENCIA EN EVOLUCION

ELIMINACIÓN DEL VELLO

TRATAMIENTOS
VASCULARES

LESIONES PIGMENTARIAS
BENIGNAS

NO ABLATIVO
REJUVENECIMIENTO DE LA PIEL

VENAS DE LAS PIERNAS

PSEUDOFOLICULITIS
BARBAE (PFB)

ONICOMICOSIS

TRATAMIENTO FACIAL
TOTAL (MOVEO GLO)



Principios clave

Tras el éxito de la plataforma AGAIN, DEKA ha diseñado y realizado una plataforma mejorada en su estilo y prestaciones: AGAIN PRO - con mayores niveles de potencia, una velocidad de tratamiento sin precedentes y nuevos pulsos específicos para tratar también el vello claro y fino con el fin de maximizar la eficacia de los tratamientos vasculares.

Por qué elegir AGAIN PRO:

Trata todo tipo de vello


AGAIN PRO no solo trata el vello oscuro, sino que gracias a los pulsos cortos es capaz de actuar también sobre el vello más claro y fino y en zonas delicadas.

Rápido, seguro y cómodo

La duración del tratamiento se reduce en un 50% gracias a un rendimiento maximizado y un aumento de la potencia máxima. Gracias a un mayor poder de enfriamiento, la percepción del dolor y los posibles efectos secundarios son casi nulos.

Multidisciplinariedad completa en todas las áreas del cuerpo

Un sistema flexible de doble longitud de onda con una amplia gama de tamaños de spot, fluencias y tasas de repetición; ofrece tratamientos fiables y rentables desde la depilación permanente hasta tratamientos vasculares y rejuvenecimiento no ablativo en todas las zonas del cuerpo.

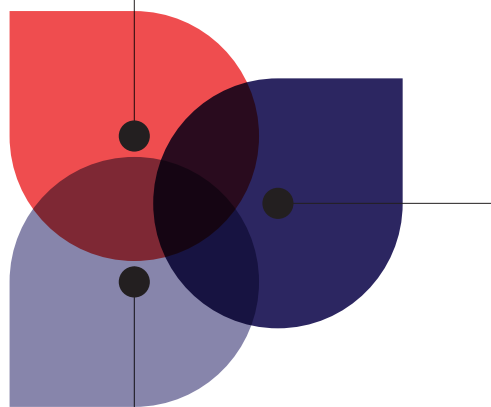



AGAIN PRO ES SOSTENIBLE

Los sistemas y dispositivos DEKA están diseñados y ensamblados para alcanzar nuestros objetivos de sostenibilidad y hacer que nuestra cadena de suministro sea trazable, transparente y fiable. Nos ajustamos a las normas medioambientales para nosotros mismos y nuestros proveedores

LOS FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS

Tratamiento de depilación: Doble rendimiento con tiempos de sesión reducidos a la mitad

AGAIN PRO introduce un sistema más eficaz y extremadamente flexible de doble longitud de onda que ofrece tratamientos fiables y rentables para todo tipo de vellos (incluso los más finos y claros) de la forma más rápida y segura.


El tiempo de tratamiento se reduce en un 50% y aumenta el rendimiento gracias a la amplia gama de tamaños de punto y a la mayor potencia del sistema.

Sistema de conexión enchufable


Bloqueo de seguridad

Clic para detener e iniciar el tratamiento

Pieza de mano ergonómica y ligera

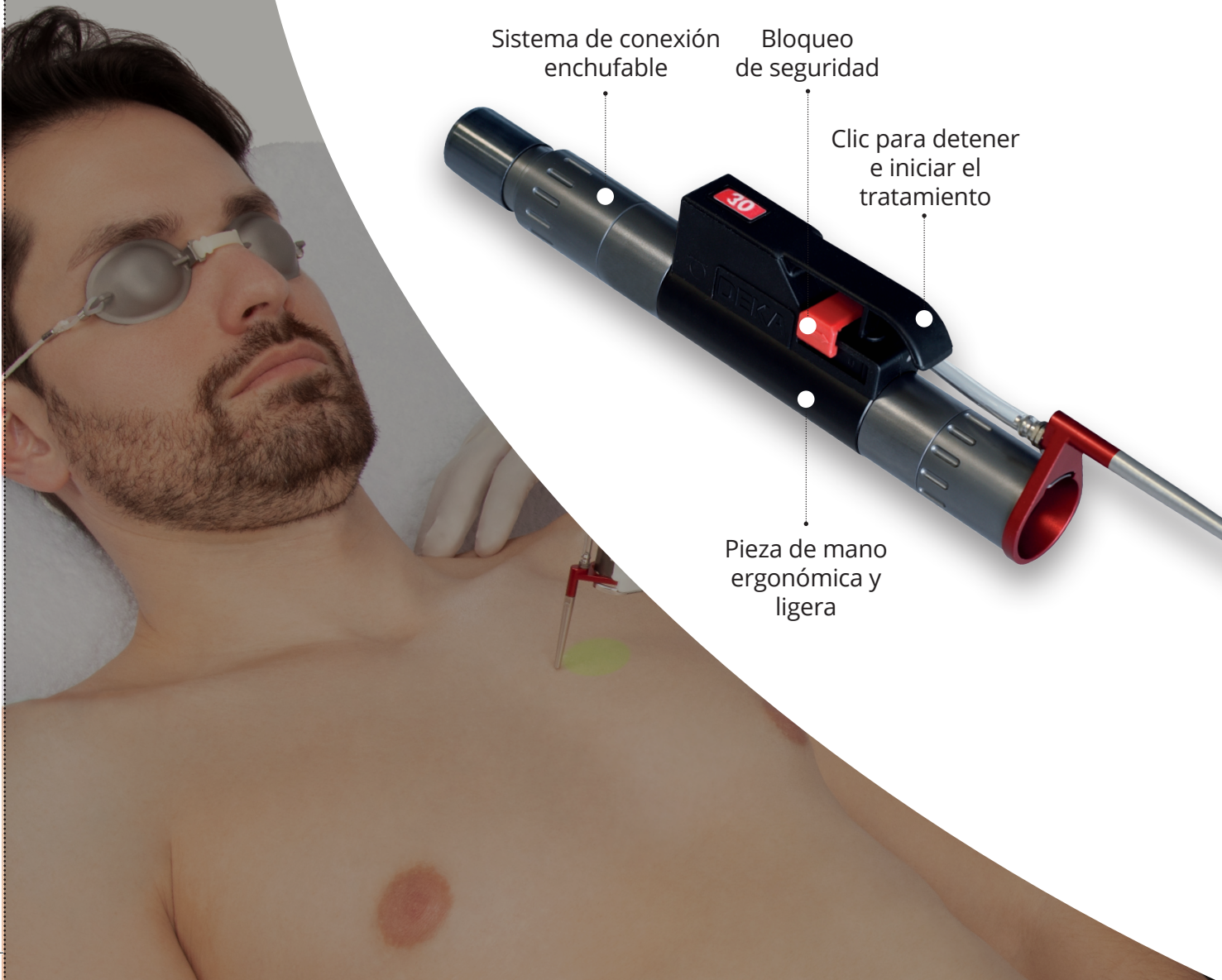

- Más de 11 piezas de mano seleccionables
- Diferentes tamaños de punto disponibles (2,5-30 mm)
- Sistema automático de reconocimiento de puntos
- Conector ergonómico para dispositivos de enfriamiento por aire
- El mayor tamaño de punto de 30 mm

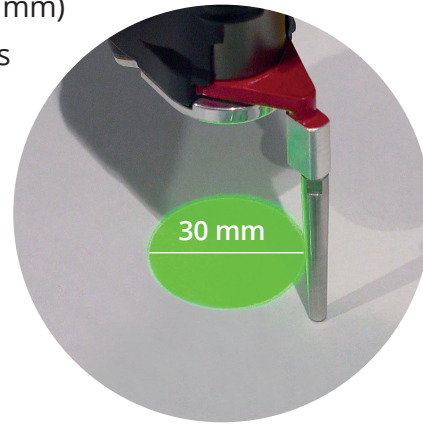

TRATAMIENTOS VASCULARES: PULSO LARGO 1064 nm

AGAIN PRO Introduce un pulso optimizado para tratamientos vasculares que maximiza la eficacia a la vez que reduce el dolor.



LOS FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS

Dentro de la innovación de Moveo

Las piezas de mano Moveo reducen drásticamente la cantidad de energía reflejada por la piel al trabajar en contacto con esta a una menor fluencia. Esta tecnología exclusiva de DEKA es adecuada para una amplia gama de aplicaciones.

moveo **HR**

Enfoque en la depilación

moveo **PL**

Lesiones pigmentadas

moveo **SR**

Rejuvenecimiento cutáneo

moveo **VL**

Lesiones vasculares



moveo **Glo**

Resultados **GLO'ing** con un tiempo de inactividad mínimo

3 Tratamientos para mejorar la piel del rostro en **UNA** sesión

SR + **VL** + **PL**

Con el tratamiento apilado Moveo Glo, AGAIN PRO puede abordar las lesiones vasculares, la estimulación del colágeno y las lesiones pigmentadas con la comodidad de moveo y un tiempo de inactividad mínimo.







Resultados clínicos



Cortesía de
Prof. P. Bonan, M.D. y M. Troiano, M.D.
Clínica Villa Donatello, Florencia - Italia

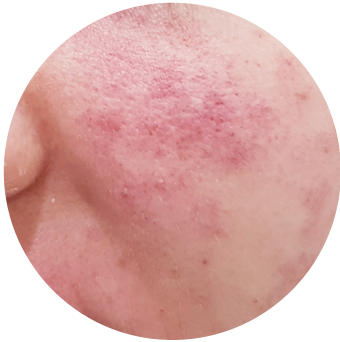

Cortesía de
S. Carpagnano, M.D.
Barletta, Italia

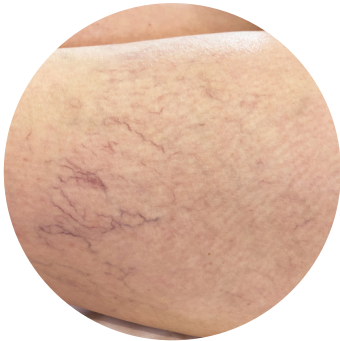

Cortesía de
Setsuko Clinic,
Montreal, Canada



Cortesía de
Prof. G. Cannarozzo M.D
*Universidad de Roma Tor Vergata,
Roma, Italia*

Conocer nuestro público y nuestro mercado

Gracias a la creciente conciencia de la belleza entre los consumidores en todo el mundo, el mercado general de la depilación está experimentando un aumento vertiginoso de su tamaño y valoración.

Mercado general de la depilación*



1er

TRATAMIENTO SOLICITADO
en el sector de la estética



+17%

**TASA DE CRECIMIENTO
COMPUESTO ANUAL**



↑ 3.9 mil millones \$

PREVISTO HASTA 2026

*Sources:

Market Study Report "Global Laser Hair Removal Market Size Status And Forecast 2019-2025"

Acumen Research and Consulting "Laser Hair Removal Market Size, Share, Trends, Scope, Growth Opportunity and Forecast 2019-2026"



Testimonio de profesionales

AGAIN PRO es el dispositivo láser de última generación y es la evolución de AGAIN, pero recientemente se ha mejorado en el diseño, la interfaz de usuario y se ha mejorado aún más con un Alexandrita más potente y rápido junto con un Nd:YAG más potente y, al mismo tiempo, muy suave.

Para la aplicación vascular, el Nd:YAG 1064 tiene ahora la capacidad de ser extremadamente delicado, de ser extremadamente suave gracias a la posibilidad de dividir los pulsos: el primero que es capaz de convertir la hemoglobina en metahemoglobina permitiendo al segundo absorber más este objetivo cerrando así el vaso.

El poder de enfriamiento de Moveo para AGAIN PRO ha mejorado en un 40% permitiendo que el tratamiento sea más suave y seguro para los fototipos más oscuros y se ha mejorado con una mayor frecuencia de emisión de pulsos que permite tratar a los pacientes de forma muy rápida. El tamaño de punto de 30 mm permite al operador realizar tratamientos de depilación rápidamente, de modo que podemos completar un procedimiento de cuerpo entero en menos de 20 minutos y la espalda de un hombre en menos de 2 minutos utilizando 2,5 o 3 hz.

Además, el tamaño de punto de 30 mm es capaz de penetrar muy profundamente en el tejido, unos 2-3 mm, y de esta forma puede tratar incluso los vellos masculinos muy profundos, un objetivo cada vez más importante para nosotros.

Dr. Michela Troiano, MD - Dermatóloga
(Italia)

LA COMBINACIÓN PERFECTA

Ventajas de AGAIN PRO

- **Tecnología láser de alta potencia**
flexibilidad con una amplia gama de tamaños de punto, fluencias y tasas de repetición para tratamientos rápidos y eficaces.
- **Una moderna estación de trabajo 2 en 1**
realiza las aplicaciones estéticas más solicitadas (depilación, lesiones vasculares y manchas cutáneas, fotorrejuvenecimiento no ablativo).
- Adecuado **para todo tipo de pieles.**
- **Rápido, seguro e indoloro** con las piezas de mano Moveo
- **Fácil cambio entre longitudes de onda**
y diferentes tratamientos en una misma sesión.
- **Conocimientos al alcance de su mano**
con la base de datos de protocolos incorporada para todo tipo de vellos, fototipo y tratamiento.
- **Bajo coste de mantenimiento.**

 **Solo para usuarios de DEKA:**
Un gran apoyo en la consulta médica
DEKA Club

Tubo prolongado para sistema de enfriamiento externo

Pantalla LCD de 15,6"
giratoria e inclinable 180°

Pulsos vasculares para Nd:YAG

Fibra óptica

Más de **11 piezas de mano estándar** (2,5-30 mm)

Tecnología Moveo
opcional (HR, PL, SR, VL)

Alex y Nd:YAG
Doble fuente



Explorar y ver
AGAIN PRO en acción

Especificaciones técnicas

AGAIN PRO		
Tipo de láser	Alexandrita* 755 nm	1064 Nd:YAG
Energía por pulso	64 J (máx.)	120 J (máx.)
Potencia láser	125 W (máx.)	180 W (máx.)
Duración del pulso	0,2 – 300 ms	
Tasa de repetición	Hasta 12 bares	
Tamaños de punto (opcional)	De 2,5 mm a 30 mm, Moveo HR, Moveo PL, Moveo SR, Moveo VL	
Fluencia	Hasta 600 J/cm ²	
Dimensiones y peso	130 (Al) cm x 40 (An) cm x 105 (Pr) cm 150 Kg	
Requisitos eléctricos	<30 A @230 Vca	

* Existe una versión de longitud de onda única, equipada únicamente con láser de Alexandrita

PELIGRO - Radiación láser visible e invisible. Evitar la exposición de la radiación directa o dispersa en los ojos o la piel. Producto láser de clase 4.

Este folleto no está destinado al mercado estadounidense.



TECNOIMAGEN
www.tecnoimagen.com.ar | 11-4582-2222



Sello del distribuidor



DEKA M.E.L.A. s.r.l.

Via Baldanzese,17 - 50041 Calenzano (FI) - Italia
Tel. +39 055 8874942 - Fax +39 055 8832884

Capacidad innata de DEKA

DEKA, una empresa derivada del Grupo ElEn., es líder global en el diseño y fabricación de láseres y fuentes de luz para aplicaciones en el ámbito de la medicina. DEKA comercializa sus dispositivos en más de 120 países a través de una amplia red de distribuidores internacionales y oficinas directas en Italia, Francia, Japón y EE.UU. La excelencia es el sello distintivo de la experiencia y el reconocimiento acumulados por DEKA en el ámbito de I+D tras más de treinta años de actividad. La calidad, la innovación y la excelencia tecnológica colocan a DEKA y sus productos en un lugar único y diferenciado en la escena global. DEKA fabrica dispositivos láser de conformidad con las especificaciones de la Directiva 93/42/EEC y su sistema de control de calidad cumple los requisitos de las normas ISO 9001 e ISO 13485.