


Sillón Ginecológico CE-1260



Compás



Motor lineal

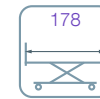

Longitud total



Anchura total



Alturas del
asiento




Nº cuerpos



Trendelenburg



Inclinación

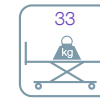

Peso



MPW

Características

Sillón ginecológico, especialmente diseñado para su uso en hospitales y clínicas para el reconocimiento ginecológico de mujeres. Gracias a su versatilidad, este sillón sirve además de camilla de reconocimiento. Algunas de sus características principales son:

Regulación de altura:

Posibilidad de regular la altura del sillón según el paciente, mediante motor eléctrico de accionamiento por mando de control.

Siendo para el paciente más cómodo acceder a él y para el trabajador a la hora de trabajar.

Respaldo:

Tramo respaldo elevable y reclinable motorizado, con accionamiento mediante mando de control, independiente del tramo de extremidades.

Extremidades:

Tramo de extremidades elevable y reclinable por accionamiento manual, mediante palancas, independiente al resto de secciones.

Trend compensado:

Posición trendelenburg mediante accionamiento eléctrico, para garantizar la resistencia y la estabilidad que requiere una situación de emergencia.

Estructura:

Estructura resistente realizada en tubo de acero con recubrimiento de epoxi-poliéster que lo protege contra la oxidación.

Diseñada con cantos redondeados para evitar lesiones tanto en el paciente como en el personal médico

Tapizado:

Tapizado en polipiel (antimicrobiana, impermeable e ignífugo según la norma UNE EN 1021/ Parte 1 y 2) priorizando la comodidad del paciente, la limpieza y la protección del sillón.

Ruedas (opcional):

Sistema de cuatro ruedas escamoteables mediante pedales, para mayor maniobrabilidad del sillón.

Otras mejoras:

Perneras ginecológicas, fabricadas en polipiel, regulables en altura y giratorias manualmente.

Almohada cervical ergonómico ajustable.

Cubeta de acero inoxidable extraíble, para deshechos, colocada debajo del asiento.

Accesorios:

Portarrollos

Portasuero

Estriberas



UNE-EN ISO 9001
UNE-EN ISO 13485
UNE-EN ISO 14971

ER-0447/2015
GS-0011/2015
GA-2015/0182

ER-0447/2015

GS-0011/2015

GA-2015/0182

Sillón Ginecológico CE-1260



TECNOIMAGEN
www.tecnoimagen.com.ar | 11-4582-2222

Información técnica

Longitud total en posición sentado	1250 mm. ± 10 mm.
Longitud total en posición tumbado	1780 mm. ± 10 mm.
Altura de la superficie de descanso (posición baja)	500 mm. ± 10 mm.
Altura de la superficie de descanso (posición alta)	900 mm. ± 10 mm.
Anchura de la superficie a sentarse	620 mm. ± 10 mm.
Inclinación máxima del respaldo (respecto del asiento)	85° ± 5°
Inclinación mínima del respaldo (respecto del asiento)	-10° ± 5°
Inclinación máxima de los pies (respecto del asiento)	10° ± 5°
Inclinación mínima de los pies (respecto del asiento)	-90° ± 5°
Trendelemburg	-10° ± 5°.
Peso del sillón	62 kg.
Peso máximo de paciente (MPW)	180 kg.

Información eléctrica


Elevación	Mediante motores lineales
Elevación respaldo	Mediante motor lineal
Tensión y frecuencia	220 V / 50 Hz
Protección penetración de líquidos	IP25

Tapizados

Valencia



Estándar

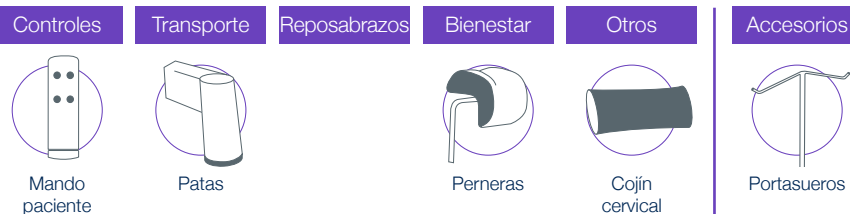

Opcional

