

HyBase V5

Mesa de operaciones

Versatilidad para todas las disciplinas



La HyBase V5 está diseñada para ofrecer un mejor desempeño clínico, una cubierta de base fácil de usar y un control remoto inalámbrico más cómodo. En definitiva, la HyBase V5 maximiza la versatilidad de la mesa de operaciones.

- Capacidad de carga extrema de hasta 400 kg
- Desplazamiento longitudinal hasta 320 mm (opcional)
- Rango de ajuste de la altura de la mesa de 365 mm
- Cuatro ruedas universales
- Control remoto inalámbrico Bluetooth (opcional)
- Puente renal (manual)



Versatilidad para todas las disciplinas

Mejorar el confort y la seguridad
Para el personal y los pacientes



400 kg
(882 lb)



Modular



140 +
ACCESORIOS
COMPATIBLES



320 mm
Desplazamiento
longitudinal



Cirugía ortopédica



Cirugía Columna vertebral



Cirugía de fémur



Cirugía de brazo o mano



Cirugía de hombro

Versatilidad excepcional para toda cirugía



Neurocirugía con soporte craneal (DORO)



Cirugía otorrinolaringológica



Cirugía oftalmológica



Cirugía tiroidea



Cirugía renal en posición lateral



Puente renal incorporado (opcional)

Ginecología y Urología



Orientación normal del paciente con placa de extensión



Orientación inversa del paciente con función de cambio




Tablero de transferencia opcional



Apoya piernas desmontable y plegable con acción neumática



Más espacio para cirujanos

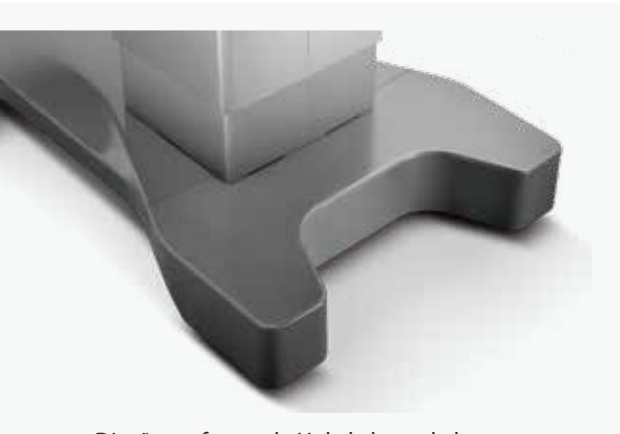

Diseño en forma de U de la base de la mesa

Eficiencia en cada paso

Control remoto inalámbrico por Bluetooth

Hay disponible como opción un control remoto inalámbrico con iconos intuitivos para controlar diversas funciones lejos de las zonas estériles.



Teclado inteligente retroiluminado
hace visibles el estado de la mesa de operaciones y las teclas de función en la oscuridad



Tecnología inalámbrica Bluetooth
para una transmisión de señal más estable



Función Flex/Reflex
permite movimientos combinados



Posición 0
Posición 0 con un botón



Indicador de batería



Orientación normal/ inversa del paciente

Máxima seguridad

Batería incorporada y sistema de control de reserva

- Con las baterías la mesa puede soportar aproximadamente 60 cirugías
- También hay un sistema de control de reserva con un circuito separado en la columna para uso de emergencia
- Desbloqueo manual del freno mediante palanca integrada en caso de avería



Colchoneta de descompresión multicapa

La mesa de operaciones de la serie HyBase V de Mindray presenta un nuevo colchón de descompresión. La estructura multicapa de 80 mm de espesor sostiene el peso del paciente con comodidad, ofrece una excelente distribución de la presión y seguridad sobre la placa de la mesa.

- Ignífugo y resistente al fuego
- Diseño superior de circulación de aire interna
- Uniones impermeables soldadas por ultrasonido (sin costuras)



Protección IPX5 contra chorros de agua desde cualquier dirección



La base ultrafina de 140 mm da acceso al arco en C convencional

Diseño modular ergonómico

