

HyBase V5 Pro

Mesa de operaciones

Versatilidad para todas las disciplinas



La HyBase V5 Pro está diseñada para ofrecer un mejor desempeño clínico, con descenso de 495 mm especial para neurocirugía y cirugía mínimamente invasiva, una cubierta de base más fácil de usar y un control remoto inalámbrico más cómodo. En definitiva, la HyBase V5 Pro maximiza la versatilidad de la mesa de operaciones.

- Capacidad de carga extrema de hasta 400 kg
- Desplazamiento longitudinal hasta 320 mm (opcional)
- Posición más baja de la mesa: 495 mm para cirugía endoscópica
- La mesa de operaciones más alta con 1020 mm
- Cuatro ruedas universales
- Control remoto inalámbrico Bluetooth (opcional)
- Puente renal (manual)



Altura mínima de la mesa 495 mm

Mejora la comodidad y la seguridad del personal y los pacientes.



Respondiendo a las necesidades de la neurocirugía y de la cirugía mínimamente invasiva, la altura más baja de la mesa resulta esencial para proporcionar un entorno de trabajo más cómodo y ergonómico para los profesionales.

Cirugía endoscópica

- Diseño de tablero bajo
- Más cerca del paciente con placas de piernas divididas
- Apropiado para el manejo de instrumentos laparoscópicos



Versatilidad excepcional para toda cirugía



Neurocirugía con abrazadera craneal (DORO)



Cirugía otorrinolaringológica



Cirugía oftalmológica



Cirugía tiroidea



Cirugía renal en posición lateral



Puente renal incorporado (opcional)

Cirugía ortopédica



Cirugía de columna vertebral



Cirugía de fémur



Cirugía de brazo o mano



Cirugía de hombro

Ginecología y Urología



Orientación normal del paciente con placa de extensión



Orientación inversa del paciente con función de cambio




Tablero de transferencia opcional



Apoya piernas desmontable y plegable con acción neumática



Más espacio para cirujanos

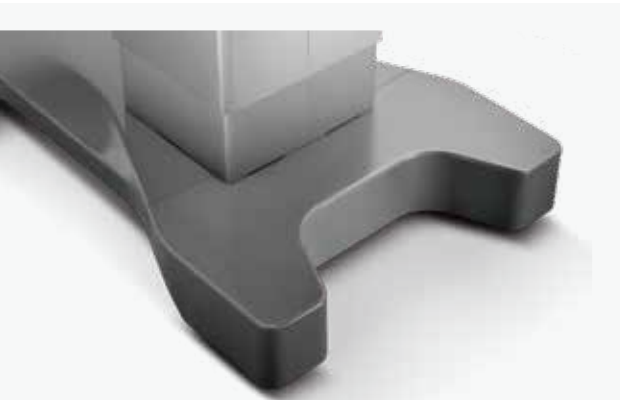

Diseño en forma de U de la base de la mesa

Eficiencia en cada paso

Control remoto inalámbrico por Bluetooth

Hay disponible como opción un control remoto inalámbrico con iconos intuitivos para controlar diversas funciones lejos de las zonas estériles.



Teclado inteligente retroiluminado
hace visibles el estado de la mesa de operaciones y las teclas de función en la oscuridad



Tecnología inalámbrica Bluetooth
para una transmisión de señal más estable y sin cables



Función Flex/Reflex
permite movimientos combinados



Posición 0
Posición 0 con un botón



Indicador de batería



Orientación normal/ inversa del paciente

Máxima seguridad

Batería incorporada y sistema de control de reserva

- Con las baterías, la mesa puede soportar aproximadamente 60 cirugías
- También hay un sistema de control de reserva con un circuito separado en la columna para uso de emergencia
- Desbloqueo manual del freno mediante palanca integrada en caso de avería



Colchoneta de descompresión multicapa

La mesa de operaciones de la serie HyBase V de Mindray presenta un nuevo colchón de descompresión. La estructura multicapa de 80 mm de espesor sostiene el peso del paciente con comodidad, ofrece una excelente distribución de la presión y seguridad sobre la placa de la mesa.

- Ignífugo y resistente al fuego
- Diseño superior de circulación de aire interna
- Uniones impermeables soldadas por ultrasonido (sin costuras)



Protección IPX5 contra chorros de agua desde cualquier dirección



La base ultrafina de 140 mm da acceso al arco en C convencional

Diseño modular ergonómico

