

DEKA
Innate Ability

EL NUEVO **SISTEMA PRO**



MOTUS
PRO

Eficacia y solidez en los tratamientos de belleza

Rendimiento inigualable en depilación,
rejuvenecimiento vascular y cutáneo

MOTUS PRO destaca en **Estética y Dermatología**



MOTUS PRO

EXCELENCIA EN EVOLUCIÓN

ELIMINACIÓN
DEL VELLO

TRATAMIENTOS
VASCULARES

LESIONES PIGMENTARIAS
BENIGNAS

NO ABLATIVO
REJUVENECIMIENTO
DE LA PIEL

VENAS DE LAS PIERNAS

PSEUDOFOLICULITIS
BARBAE (PFB)

ONICOMICOSIS

TRATAMIENTO FACIAL
TOTAL (MOVEO GLO)



Principios clave


La tecnología MOTUS ha cambiado la experiencia de los pacientes en los tratamientos de depilación sin dolor. Hoy, la familia MOTUS de DEKA se amplía con la introducción de MOTUS PRO: Una plataforma de dos longitudes de onda complementarias (755 nm Alejandrita + 1064 Nd:YAG), renovada en su estilo y prestaciones con mayores niveles de potencia, tratamientos más rápidos, una amplia gama de tamaño de spot y pulsos específicos que hacen de esta novedad una de las más avanzadas y flexibles en el ámbito de la dermatología.

Por qué elegir MOTUS PRO:

Alta
potencia
de pico
2-3 ms

Rápido, seguro y potente

La duración del tratamiento se reduce en un 50% gracias a un rendimiento maximizado, un mayor tamaño del spot (hasta 24 mm) y un aumento de la potencia pico.

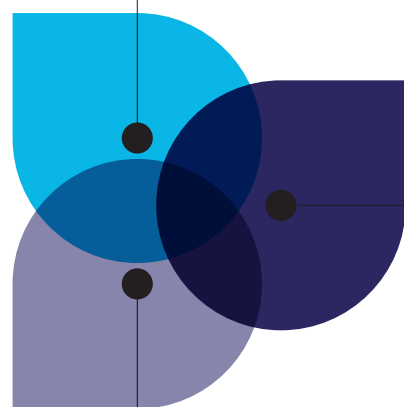

Tecnología tradicional y Moveo

MOTUS PRO dispone de ambas tecnologías de tratamiento: Más de 10 piezas de mano estándar y 4 piezas de mano Moveo para permitir el tratamiento de todo tipo de peticiones del paciente con el instrumento más adecuado.

Comodidad y resultados

Gracias a su mayor potencia, los tratamientos son más eficaces y la percepción del dolor es casi nula (la capacidad de enfriamiento ha aumentado un 40%).

MOTUS PRO

LOS FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS

Tratamiento de depilación: El éxito en sus manos

MOTUS PRO presenta un sistema de doble longitud de onda más eficaz y extremadamente flexible que ofrece tratamientos fiables y rentables en **todo tipo de vello** (incluso el más fino y claro) **y de piel** (incluso la más oscura).

Motus PRO hace que la depilación con Alex sea eficaz e indolora.

La fuente Nd:YAG amplía el campo de acción al ofrecer la posibilidad de tratar lesiones vasculares como capilares o telangetasias, y tratamientos de rejuvenecimiento cutáneo.

- Más de 10 piezas de mano seleccionables
- **Tamaño de punto de 24 mm disponible**
- Sistema automático de reconocimiento de puntos
- Conector ergonómico para dispositivos de enfriamiento por aire

24 mm
tamaño del
punto



TRATAMIENTOS VASCULARES: PULSO LARGO 1064 nm

MOTUS PRO introduce un pulso optimizado para los tratamientos vasculares que maximiza la eficacia y reduce el dolor.

LOS FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS

Dentro de la innovación de Moveo

Las piezas de mano Moveo reducen drásticamente la cantidad de energía reflejada por el tejido al trabajar en contacto con la piel a menor fluencia. Esta tecnología exclusiva de DEKA es adecuada para una amplia gama de aplicaciones.

moveo HR

Enfoque en la depilación

La tecnología Moveo HR consiste en múltiples pasadas sobre pequeñas áreas definidas. Esto provoca un calentamiento gradual y la destrucción del vello no deseado. El procedimiento es prácticamente indoloro y con prácticamente cero efectos secundarios.

moveo PL

Lesiones pigmentadas

Al calentar progresivamente las lesiones pigmentadas, MOVEO PL es muy eficaz y cómodo, sin decoloración de la piel ni hipopigmentación.

moveo SR

Rejuvenecimiento cutáneo

La acción controlada multipaso de MOVEO SR provoca un aumento progresivo del calor a nivel dérmico, lo que estimula un proceso de neocolagénesis.

moveo VL

Lesiones vasculares

La acción específica de MOVEO VL actúa directamente sobre las lesiones vasculares con una reflexión reducida de la energía. Esto hace que MOVEO VL sea muy eficaz en el enrojecimiento vascular superficial.

moveo PL + SR + VL = moveoGlo

para una mejora total de la piel del rostro con el tratamiento apilado **Moveo Glo, MOTUS PRO** puede actuar sobre las lesiones vasculares, la estimulación del colágeno y las lesiones pigmentadas con la comodidad de Moveo y sin tiempo de inactividad.



LA COMBINACIÓN PERFECTA

Motus PRO Strength

- **Tecnología láser de alta potencia**
flexibilidad con una amplia gama de tamaños de punto
repetición para tratamientos rápidos y eficaces.
- Adecuado **para todo tipo de piel**, todo tipo de vello,
todas las zonas del **cuerpo**.
- **Rápido, seguro e indoloro** con las piezas de mano Moveo.
- **Fácil cambio entre longitudes de onda**
y diferentes tratamientos en una misma sesión.
- **Conocimientos al alcance de la mano** con el protocolo
integrado base de datos para todo tipo de vello, fototipo y tratamiento.
- **Bajo coste de mantenimiento.**



Solo para usuarios de DEKA:

un gran apoyo en la consulta médica

DEKA Club



Escanear y ver
MOTUS PRO en acción

Especificaciones técnicas

MOTUS PRO		
Tipo de láser	755 nm Alejandrita	1064 Nd:YAG
Energía por pulso *	52 J (máx)	63 J (máx)
Duración del pulso	0,2 – 300 ms	
Tasa de repetición	Hasta 12 Hz	
Tamaños de punto (opcional)	De 2,5 mm a 24 mm, Moveo HR, Moveo PL, Moveo SR, Moveo VL	
Fluencia	Hasta 600 J/cm ²	
Dimensiones y peso	114 (alto) cm x 45 (ancho) cm x 94 (fondo) cm 100 kg	
Requisitos eléctricos	<16 A @230 Vca	

* Existe una versión de longitud de onda única, equipada únicamente con láser Alejandrita o láser Nd:YAG.

PELIGRO - Radiación láser visible e invisible. Evitar la exposición de la radiación directa o dispersa en los ojos o la piel. Producto láser de clase 4.

Este folleto no está destinado al mercado estadounidense.

Motus Pro es una configuración comercial de Motus Az/AZ+.



TECNOIMAGEN
www.tecnoimagen.com.ar | 11-4582-2222

MOTUS
PRO

DEKA
Innate Ability



Sello del distribuidor



DEKA M.E.L.A. s.r.l.

Via Baldanzese,17 - 50041 Calenzano (FI) - Italia
Tel. +39 055 8874942 - Fax +39 055 8832884

Habilidad innata DEKA

Una filial de El.En. Group, DEKA es líder mundial en el diseño y la fabricación de láseres y fuentes de luz para aplicaciones médicas. DEKA comercializa sus dispositivos en más de 120 países a través de una extensa red de distribuidores internacionales, así como de oficinas directas en Italia, Francia, Japón y EE.UU. La excelencia es el sello distintivo de la experiencia y el reconocimiento cosechados por DEKA en el ámbito de la I+D en más de treinta años de actividad. La calidad, la innovación y la excelencia tecnológica sitúan a DEKA y sus productos en una posición única y distinguida en el ámbito mundial. DEKA fabrica dispositivos láser de conformidad con las especificaciones de la Directiva 93/42/CEE y su sistema de garantía de calidad se ajusta a las normas ISO 9001 e ISO 13485.