

**DEKA**  
Innate Ability

EL NUEVO **SISTEMA PRO**



**onda**  
PRO

## Tecnología de precisión- GigaWave PGW Más allá de Coolwaves

La evolución en el contorno no invasivo y en reafirmar

ONDA PRO destaca en **Estética, Dermatología y Cirugía Plástica**



# ONDA PRO

EXCELENCIA EN EVOLUCIÓN

LIFTING Y REMODELACIÓN

TENSADO CUTÁNEO

REDUCCIÓN DE GRASA

CELULITIS



## Principios clave

Tras el éxito de la Plataforma ONDA, DEKA ha diseñado una pieza de mano específica, introduciendo una nueva solución: PGW (Precision-GigaWave Technology), que permite trabajar de forma aún más precisa y selectiva.

Una nueva pieza de mano mejora el rendimiento de ONDA PRO: POCKET, caracterizado por una profundidad de acción especial que efectúa un tensado y un lifting específicos. También reduce la grasa submentoniana.

ONDA PRO es la nueva y única tecnología revolucionaria para la remodelación y reestructuración.

## La triple acción de ONDA PRO:

### Lifting


Gracias a su tecnología patentada PGW Technology, las ondas Coolwaves de ONDA PRO son aún más selectivas y producen un fuerte efecto de estiramiento, creando así un potente efecto lifting

### Tensado

La acción profunda en la dermis produce una contracción inmediata de las fibras de colágeno y la producción de nuevo colágeno hace que los tejidos se vuelvan compactos y tonificados

### Celulitis y reducción de grasa

Las ondas Coolwaves y la tecnología PWG destruyen profundamente las membranas de las células grasas subcutáneas. El resultado es una precisa remodelación

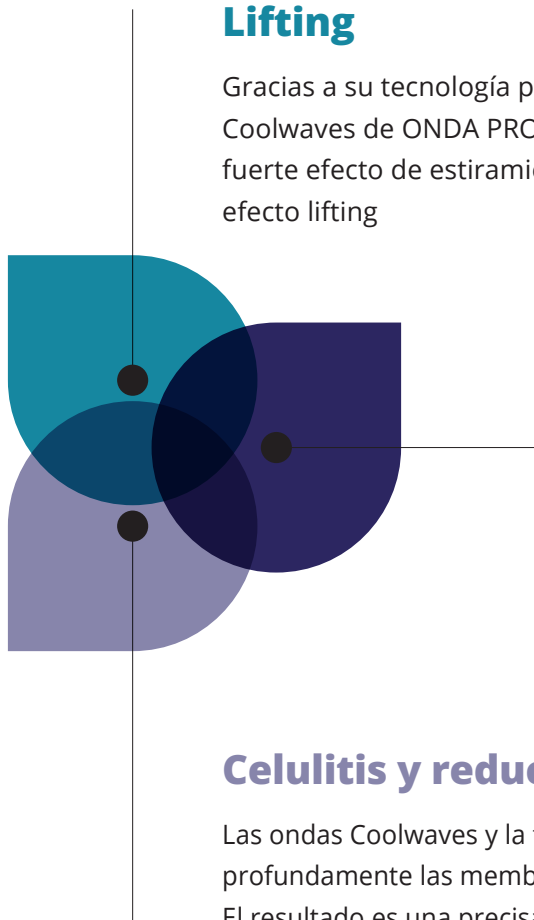



LOS FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS

## Pieza de mano Pocket:

Diseño ergonómico para optimizar la eficacia en zonas pequeñas



## Completamente preciso

Las piezas de mano están específicamente diseñadas para emitir ondas **Coolwaves®** de forma controlada. Gracias a la novedosa tecnología PGW, la energía se concentra solo donde es necesaria (en función de la diferente profundidad de acción de la pieza de mano) y el **tejido circundante queda totalmente preservado**.

## Diferentes profundidades de penetración para diferentes indicaciones de uso

Las tres piezas de mano, **Deep, Shallow y Pocket** difieren en su profundidad de acción. Cada uno está diseñado para **áreas y aplicaciones diferentes**.



### **Pocket\***

Lo mejor para el **Reafirmante, lifting - debajo del mentón**



### **Shallow\***

Lo mejor para la **celulitis | Tensado de la piel | Adiposidad localizada**



### **Deep\***

Lo mejor para la **Adiposidad localizada para grandes áreas**

## Sistema inteligente de enfriamiento integrado

Un sistema de enfriamiento de la piel por contacto está integrado en las piezas de mano y contrarresta el calor inducido por las microondas. **Se preserva la dermis superficial, lo que garantiza la total comodidad del paciente** y minimiza los efectos secundarios y la inflamación.


\*Todas las piezas de mano son opcionales



LOS FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS

## Tecnología PGW y mecanismo de acción

La energía de las microondas llega al objetivo: la energía se confina ahora con mayor precisión, causando efectos diferentes en zonas seleccionadas a distintas profundidades de penetración.

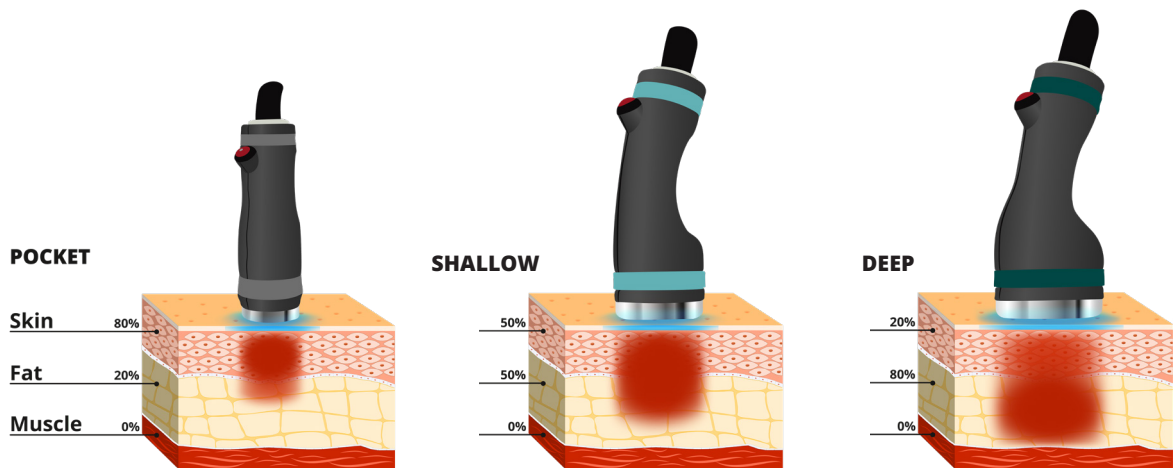



## Resultados clínicos



**Celulitis y Adiposidad localizada**  
Cortesía de Dra. Michela Troiano  
*Firenze - Italia*



**Adiposidad localizada y Laxitud**  
Cortesía de Dra. Diana Hvas  
*Dermatóloga - Dinamarca*



**Adiposidad localizada (debajo del mentón)**  
Cortesía de Dr. Giovanni Turra M.D.,  
*Rudiano (BS) - Italy*



**Laxitud: debajo del mentón**  
**Pieza de mano Pocket**  
Cortesía de Prof. Paolo Bonan  
*Dermatólogo - Italia*



## **La tecnología Coolwaves y PGW son la última frontera de la estética**

Las ondas Coolwaves se presentaron en 2018 como la primera tecnología del mundo que utiliza microondas especiales y seguras para el tratamiento de adiposidades localizadas, celulitis y laxitud cutánea en todo el cuerpo, en particular en abdomen, muslos y caderas: disuelven la grasa, tensan y contornean la piel, reafirmando los tejidos.



**Gracias a la eficacia de la novedosa PGW (Precision-GigaWave Technology) las microondas son el tratamiento más solicitado por los famosos en Estados Unidos.**




**ONDA PRO ES SOSTENIBLE**

Los sistemas y dispositivos DEKA están diseñados y ensamblados para alcanzar nuestros objetivos de sostenibilidad y hacer que nuestra cadena de suministro sea trazable, transparente y fiable. Nos ajustamos a las normas medioambientales para nosotros mismos y nuestros proveedores

LA COMBINACIÓN PERFECTA

## Puntos fuertes de ONDA PRO

- Las Coolwaves de ONDA PRO son más selectivas y eficaces gracias a la novedosa **tecnología PGW**
- **Las ondas Coolwaves** son los primeros tratamientos noinvasivos tratamiento reductor y remodelador de la grasa
- Apto **para todo tipo de pieles**
- **Sin tiempo de inactividad social ni hematomas**
- **Una experiencia fantástica**  
No duele como los tratamientos quirúrgicos invasivos y dolorosos
- **Triple acción selectiva** basada en diferentes profundidades de acción de piezas de mano
- Se enfoca en la **seguridad y la eficacia**
- **Sin materiales desechables innecesarios**

 **Solo para usuarios de DEKA:**  
un gran apoyo en la consulta médica

**DEKA** Club

**NUEVO software GUI  
fácil de usar**

**Piezas de mano ergonómicas  
(POCKET, SHALLOW, DEEP)**



**Luces LED**

**COOLWAVES®**

**TECNOLOGÍA PGW**

# Especificaciones técnicas

ONDA PRO	
<b>Fuente</b>	Microondas - Coolwaves® (Tecnología PGW)
<b>Frecuencia</b>	2.45 GHz
<b>Potencia</b>	Hasta 200 W
<b>Piezas de mano inteligentes</b>	Deep - Shallow - Pocket
<b>Enfriamiento de la pieza de mano</b>	Enfriamiento integrado patentado
<b>Control de emisiones</b>	Interruptor de dedo
<b>Base de datos</b>	Tutorial integrado con protocolos de tratamiento
<b>Dimensiones y peso</b>	110 (Al) cm x 40 (An) x 70 (Pr) cm   60 Kg
<b>Requisitos eléctricos</b>	100-240 Vca - 50/60 Hz - 1500 VA

Este folleto no está destinado al mercado estadounidense.



**TECNOIMAGEN**  
www.tecnoimagen.com.ar | 11-4582-2222



Síguenos en



www.dekalaser.com

Sello del distribuidor



**DEKA M.E.L.A. s.r.l.**

Via Baldanzese, 17 - 50041 Calenzano (FI) - Italia  
Tel. +39 055 8874942 - Fax +39 055 8832884

#### Habilidad innata DEKA

Una filial de El.En. Group, DEKA es líder mundial en el diseño y la fabricación de láseres y fuentes de luz para aplicaciones médicas. DEKA comercializa sus dispositivos en más de 120 países a través de una extensa red de distribuidores internacionales, así como de oficinas directas en Italia, Francia, Japón y EE.UU. La excelencia es el sello distintivo de la experiencia y el reconocimiento cosechados por DEKA en el ámbito de la I+D en más de treinta años de actividad. La calidad, la innovación y la excelencia tecnológica sitúan a DEKA y sus productos en una posición única y distinguida en el ámbito mundial. DEKA fabrica dispositivos láser de conformidad con las especificaciones de la Directiva 93/42/CEE y su sistema de garantía de calidad se ajusta a las normas ISO 9001 e ISO 13485.