

Conectividad muy compatible e interoperable

Las diferentes opciones de conectividad de Mindray le permiten preparar los sistemas hospitalarios para un crecimiento escalable y la innovación futura. Nuestras soluciones de conectividad, completas y muy compatibles, hacen que la integración de los datos digitales de los pacientes sea simple y segura.

- Se conecta sin problemas a sus sistemas EMR
- Identificación del paciente e inicio de sesión de los usuarios
- Sistema híbrido de monitorización central BeneVision para maximizar su inversión
- Incluye el Administrador de dispositivos M-IoT para controlar la eficiencia clínica de los equipos



VS 9

Monitor de constantes vitales

Fiel a la realidad

Calidad y fiabilidad reconocidas

El VS 9 fue creado para una larga vida útil: tiene el soporte de un software de mantenimiento innovador y un diseño robusto.

Limpieza sin problemas

Validado para 51 agentes limpiadores líderes en el mercado, para una limpieza más rápida y menor degradación con el tiempo.

Instalación más fácil

Con configuración paso a paso para diversas necesidades clínicas con un asistente de inicio similar a un smartphone.



- Práctica mesa de trabajo con batería auxiliar opcional para un mayor tiempo de funcionamiento
- Diseñado para una rápida instalación sin herramientas en menos de un minuto
- Gestión de accesorios dedicados según sus preferencias
- Ruedas silenciosas y suaves para facilitar su uso





Ve a la verdadera imagen del deterioro del paciente

Para asegurar una reacción oportuna al deterioro del paciente y un mayor cumplimiento de las directrices del hospital, el VS 9 proporciona una amplia gama de parámetros de constantes vitales con una variedad de herramientas para apoyar las decisiones clínicas.

EWS (alerta temprana) automática

- Cumple con todas las normas de EWS
- Permite ofrecer mensajes de reporte personalizables

BP (tensión sanguínea) ortostática

- Ayuda a evaluar y evitar el riesgo de caída de forma innovadora
- Personalizable según los diversos requisitos clínicos

BP promedio


- Medición de AOBP desatendida con un flujo de trabajo personalizado
- Proporciona valores precisos del estado real del paciente

Desde el control de pacientes internados hasta los controles de externos, el Monitor de constantes vitales VS 9 despliega todo el potencial de las observaciones de rutina con opciones de flujo de trabajo integrales y flexibles que permiten al personal clínico brindar atención de alta calidad a cada uno de los pacientes.

Fidelidad a las constantes vitales

El VS 9 proporciona mediciones precisas de las constantes vitales muy rápidamente, maximizando la comodidad del paciente y la eficiencia clínica.

Inflado y medición de la PANI TrueBP™ de Mindray en 15 segundos Opciones de medición de SpO₂ de Mindray, Masimo SET y Nellcor ARTEMA Sidestream CO₂ con una tasa de muestreo de 50 ml/min

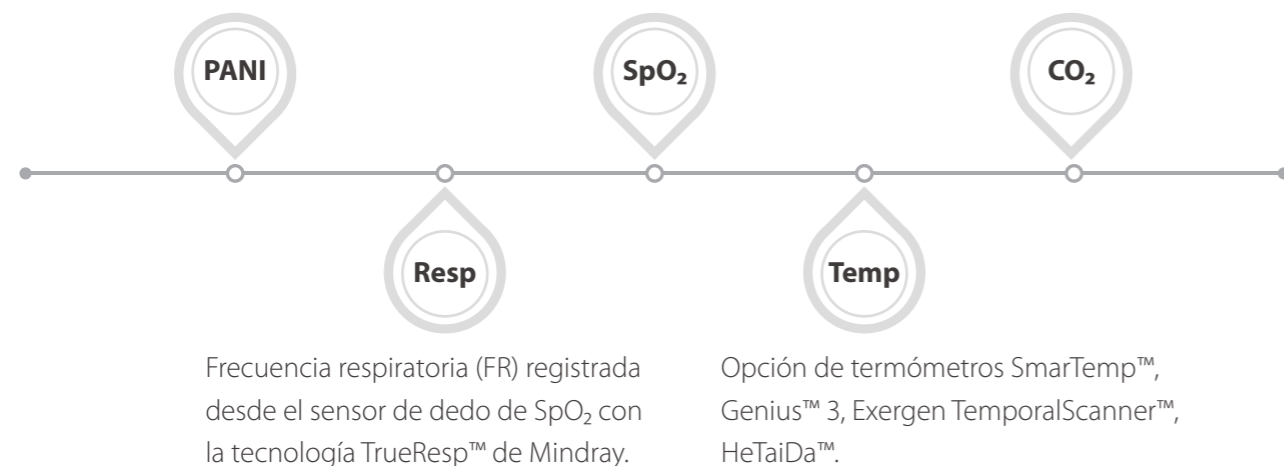

Flujos de trabajo verdaderamente flexibles

Los flujos de trabajo del VS 9 ofrecen una documentación completa en el lugar de atención, liberan todo el potencial de las observaciones a pie de cama y ayudan a consolidar y acelerar las evaluaciones.

Interfaz intuitiva

- Pantalla de alta resolución de 10.1" para visualizar más información
- Operación por gestos intuitivos con pantalla táctil capacitiva

Más información a pie de cama

- Hasta 50 entradas manuales personalizables
- Herramienta de representación infográfica del dolor

Cree el flujo de trabajo adecuado

- Diseño de la pantalla y ajustes de parámetros personalizables
- Flujos de trabajo configurables por perfiles departamentales
- Mejora el cumplimiento de las directrices del hospital por parte del personal clínico

